




## DOLomite JAZZ

 Gebruik de rollator niet als rolstoel of voor het transport van personen.

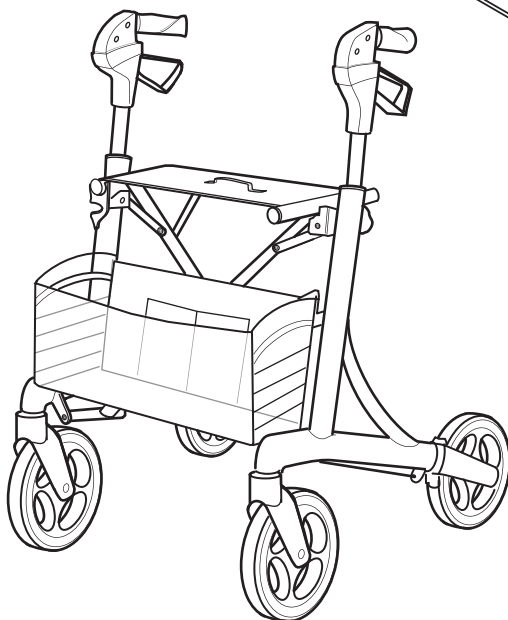

### GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de rollator gebruikt.  
De rollator is zowel geschikt voor gebruik in huis als voor gebruik buiten.





**VEILIGHEID**

- Het is verboden om op de rollator te staan of hem te gebruiken voor het transport van personen.
- Gebruik de zitting om op te zitten.
- Tijdens zitten op de rollator moeten de tweeremmen in de parkeerstand staan.
- Wanneer u de rollator gebruikt als steun, bijvoorbeeld bij het opstaan uit een stoel, moeten de remmen in de parkeerstand staan.
- Tijdens het zitten nooit de rollator verplaatsen door afzetten met de voeten.
- Gebruik de rollator niet op een trap of roltrap.
- Wees voorzichtig op een hellende ondergrond.
- Tijdens het lopen moet de rollator volledig zijn uitgevouwen. N.B. Alleen gebruiken als steun bij het lopen.
- Wees voorzichtig als de mand zwaar geladen is. Lading mag uitsluitend vervoerd worden in de mand of op de laadplank. Maximum belasting van de mand: 5 kg, en van de laadplank: 5 kg.
- Voor het gebruik de beschermende folie van de wielen verwijderen.
- De handvatten mogen niet naar buiten worden gedraaid omdat dan de zijwaartse stabiliteit van de rollator afneemt.

**MONTAGE**

- A) Montage van de mand.
- B) Montage van de laadplank.

**SAMENVOUWEN**

- C)
  1. Ga naast de rollator staan.
  2. Trek de band op de zitting omhoog. N.B. Wees voorzichtig bij het samenvouwen en uitvouwen van de rollator.

**TRANSPORT**


- D) Fixeer de samengevouwen rollator met de transportvergrendeling.

**GEBRUIKSKLAAR MAKEN**

- E) Vouw de rollator uit door op de buizen van de zitting te drukken. Controleer voor het gebruik of de vergrendeling in de blokkeerstand staat. N.B. Beknellingsgevaar.

**STOEPHULP**

- F) Gebruik de stoephulp om gemakkelijker een verhoging zoals een stoep te betreden.

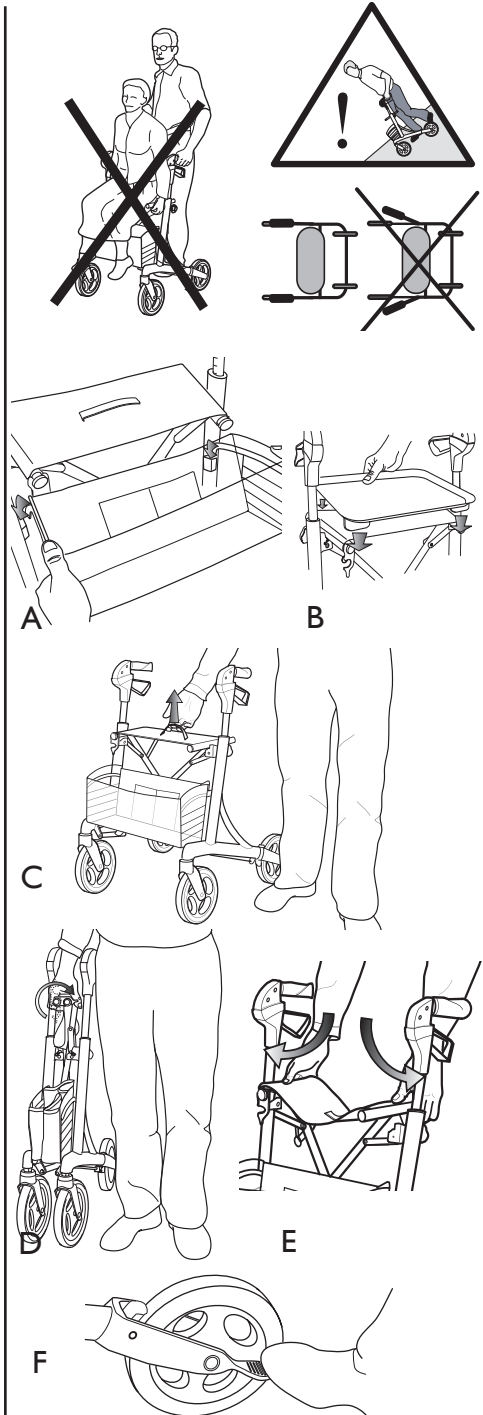

## REMMEN

G. Om te remmen, beide remhendels omhoog trekken.

## PARKEERREM

H. Druk de remhendels voorzichtig omlaag voor de parkeerstand. Een duidelijk klikgeluid geeft aan dat de rem in de juiste positie is geplaatst. Het is belangrijk dat beide remmen in de parkeerstand staan.

Om de rem te ontgrendelen trekt u de remhendels omhoog. Wanneer u op de rollator zit, moeten beide remmen in de parkeerstand staan.

## INSTELLEN VAN DE REMKRACHT

I. Bij onvoldoende remkracht kunt u de remkabel afstellen. Gebruik hiervoor vaste sleutels, 7 en 10 mm (niet bijgeleverd).

## HANDGREPEN


### Hoogte-instelling van de handgrepen.

J. Ga achter de rollator staan.


In principe moeten de handgrepen zich ter hoogte van de polsen bevinden.

K. Maak met behulp van het draaiwiel de handgriepbuis vrij en stel hem af op de geschikte hoogte. Fixeer hem daarna met het wiel. Controleer of beide handgrepen even hoog zijn afgesteld.


G

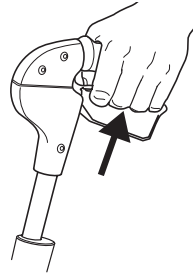


H

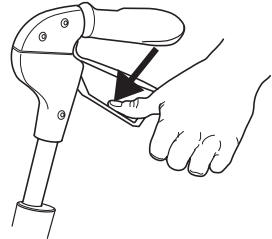


I

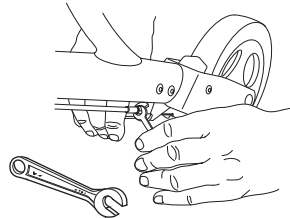

J

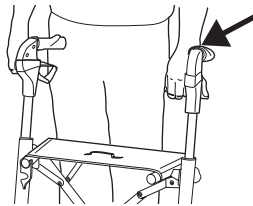

K

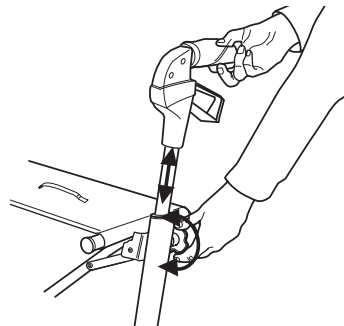

## ONDERHOUD - VEILIGHEID

Om verzekerd te zijn van een goede werking en veiligheid, dient u ervoor te zorgen dat regelmatig de volgende stappen worden uitgevoerd:

- Maak de rollator schoon met een gewoon schoonmaakmiddel. Droog hem af. De wielen schoonhouden.
- Controleer of bouten en verstelschroeven goed zijn aangehaald.
- Neem onmiddellijk contact op met de dealer, wanneer aan de rollator een defect wordt geconstateerd. Gebruik nooit een defecte rollator. Probeer niet zelf de rollator te repareren!

N.B. Alleen gebruiken als steun bij het lopen. Max. gewicht van de gebruiker:


**DOLOMITE JAZZ** 130 kg. **DOLOMITE** aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor aanpassingen, foutieve reparaties e.d. die buiten haar controle zijn uitgevoerd.

### INSTRUCTIES VOOR DE VERNIETIGING VAN PRODUCT EN VERPAKKING:


Wanneer het product afgedankt wordt, moet het samen met accessoires en verpakking op de juiste manier gesorteerd worden. De verschillende onderdelen kunnen volgens de materiaalaanduiding worden gescheiden en verwerkt.

Het etiket op de **DOLOMITE JAZZ** bevat alle belangrijke technische gegevens.

- 1: Artikelnummer
2. Productnaam
3. Serienummer
4. Productiedatum
5. Maximaal gewicht van de gebruiker
6. N.B. Zie gebruiksaanwijzing
7. Rollator voor binnenshuis/buitenshuis
8. Maximale breedte van de rollator
9. Naam van de producent

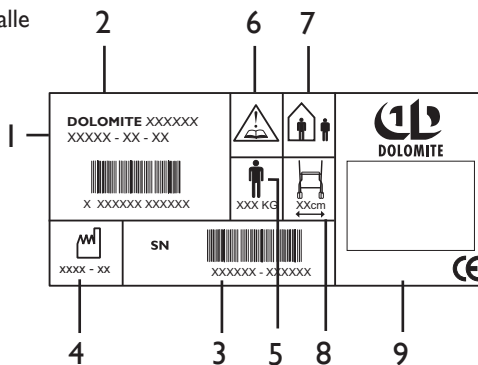

	<u>520</u>	<u>600</u>
A	62 cm	62 cm
B	67-81 cm	75-97 cm
C	39 cm	39 cm
D	43 cm	43 cm
E	52 cm	60 cm
F	67 cm	67 cm
G	26 cm	26 cm
Gewicht:	7,2 kg	7,8 kg

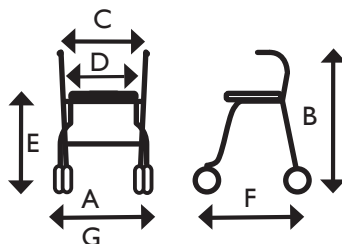

Diameter voor- en achterwielen: 20 cm



Invacare B.V., Celsiusstraat 46 - 6716 BZ Ede  
 Tel.: +31 (0)318-695757, FAX: +31 (0)318-695758  
 email: cseede@invacare.com, www.invacare.nl

Invacare NV, Autobaan 22 - 8210 Loppem  
 TEL.: +32 (0)50-831010, FAX: +32 (0)50-831011  
 email: belgium@invacare.com, www.invacare.be