



Invacare® | **ORION METRO**

L'association parfaite entre
confort, sécurité et fiabilité



Que ce soit pour profiter d'une courte balade pour voir des amis ou une virée shopping, l'**Orion METRO** est le choix idéal pour vous y emmener.

Le nouvel **Orion METRO**, plus ergonomique, a été conçu en conservant les aspects les plus importants pour les nouveaux utilisateurs et les plus chevronnés. Par conséquent, il est équipé de nombreuses caractéristiques pour assurer à l'utilisateur une expérience de conduite facile et appréciable, en toute sécurité.

L'**Orion METRO** est l'association parfaite entre confort, sécurité et fiabilité !



Une conduite contrôlée et robuste

Le système de quatre suspensions de l'**Orion METRO** a été conçu pour rouler sur une variété de surfaces et terrains différents et ainsi, vous offrir une conduite agréable, confortable tout en contrôle. Son moteur combiné à des roues de 11", vous emmènera partout en douceur et en sécurité.

La sécurité comme priorité

En plus d'un système d'éclairage unique et de l'allumage automatique des feux stop, l'**Orion METRO** est équipé d'une réduction automatique de la vitesse lors des virages, pour des manoeuvres confortables et sécurisées, à tout moment. Son système de débrayage en deux étapes limite tous risques de roues libres involontaires.

Maintenance simple

Construit avec des composants de qualité, l'**Orion METRO** est à la fois fiable et facile à entretenir. Retirez simplement le capot pour accéder aux batteries, à l'électronique, au moteur et aux câbles. L'électronique et le moteur sont protégés contre la corrosion et l'eau afin de préserver les fonctions vitales du scooter contre la saleté et tout dysfonctionnement.





Orion METRO 4 roues



Orion METRO 3 roues




Réglage de la colonne de direction

Les utilisateurs peuvent facilement régler la colonne de direction en angle grâce au levier.



Poignées de direction ergonomiques

offre une conduite confortable avec une bonne traction et une bonne stabilité.

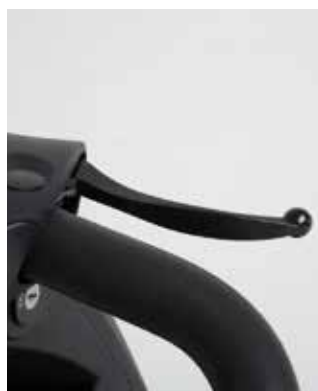

Frein à main

Assure un freinage immédiat, si besoin.



Feux de stop

S'allument automatiquement, lors de la décélération et le freinage.




Levier de débrayage en deux étapes

Ce levier empêche le scooter de partir accidentellement en roue libre.



Réducteur de la vitesse automatique

La vitesse est automatiquement réduite lors des virages pour plus de sécurité.

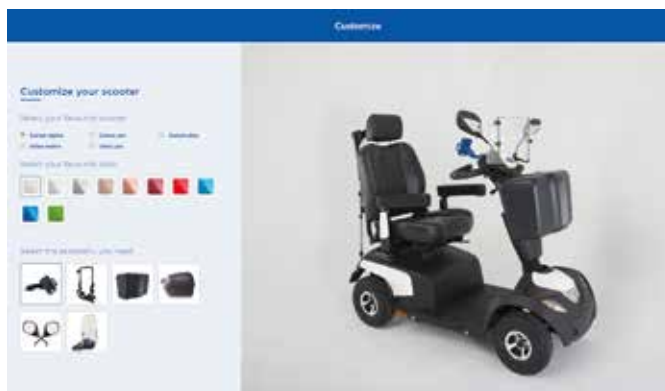

Personnalisez votre scooter grâce aux différents coloris de carénages et accessoires

Choisissez parmi 10 coloris de carénages et plus de 25 accessoires pour personnaliser votre scooter. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.invacarescooter.com.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

| | Largeur de dossier | Profondeur d'assise | Hauteur sol/siège | Hauteur de dossier | Largeur hors-tout | Longueur hors-tout | Poids du scooter |
|----------------|--------------------|---|----------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|
| 3 roues | 510 mm | Comfort and Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm | Min. 440 mm Max. 510 mm | Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm | 660 mm | 1240 mm | 103 kg |
| 4 roues | 510 mm | Comfort and Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm | Min. 440 mm Max. 510 mm | Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm | 660 mm | 1270 mm | 110 kg |

| | Poids de la partie la plus lourde | Poids max. utilisateur | Batteries | Diamètre de giration | Franchissement | Garde au sol | Pente max. sécurité |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 3 roues | 52 kg | 136 kg | 2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM | 2250 mm | 80 mm | 78 mm | 6° |
| 4 roues | 57 kg | 136 kg | 3 x 12 V/50 Ah (C20) AGM | 2600 mm | 80 mm | 78 mm | 6° |

| | Autonomie | Vitesse | Moteurs |
|----------------|-----------|-------------|---|
| 3 roues | 54 km | 10 km/h | 10 km/h: 240 W / 600 W ¹ |
| 4 roues | 54 km | 6 / 10 km/h | 6 km/h: 240 W / 500 W ¹ 10 km/h: 240 W / 600 W ¹ |

1. Pic de performance

Coloris des carénages

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| Blanc Givré | Bleu Electrique | Vert Python | Champgne Anodisé | Cuivre Anodisé | Vinyle Noir |
|  |  |  |  |  |  |
| Rouge Métallisé | Chrome | Gris Argenté | Bleu Anodisé | Rouge Passion | |
|  |  |  |  |  | |

Revêtement du siège

Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium

Trusted Solutions,
Passionate People

