



Invacare® | **ORION METRO**

De perfecte combinatie van comfort,  
veiligheid en betrouwbaarheid



Of u nu geniet van een snelle uitstap om vrienden te ontmoeten tijdens een etentje of een korte dagtrip naar de lokale winkels, de **Orion Metro** is de ideale keuze om u daar te brengen.

De nieuwe, gebruiksvriendelijke **Orion Metro** is in alle opzichten ontworpen om te focussen op de hoofdaspecten die belangrijk zijn voor zowel nieuwe als geroutineerde scooter gebruikers. Daarom is de **Orion Metro** uitgerust met talloze functies om gebruikers een veilige, prettige en gemakkelijke rit te garanderen.

De **Orion Metro** is de perfecte combinatie van comfort, veiligheid en betrouwbaarheid!



### Gecontroleerde en stevige aandrift

Het veersysteem op de compacte **Orion Metro** is ontworpen om te navigeren naar verscheidene alledaagse oppervlaktes en terreinen. Het laat u toe te ontspannen en te genieten van een gecontroleerde, stevige aandrift en dit in alle comfort. De sterke motor, gecombineerd met 11" pneumatische banden, neemt u vlot en veilig mee over obstakels en oneffen gronden.

### Veiligheid staat centraal

Naast een uniek verlichtingssysteem is de **Orion Metro** uitgerust met een elektronische snelheidsreductie die automatisch snelheid vermindert in bochten, garandeert altijd veilige, comfortabele manoeuvres.

Bovendien voorkomt de twee-staps vrijloop hendel dat de scooter uit zichzelf gaat rijden. Deze kenmerken, gecombineerd met uitvoerige tests ondergaan in de onafhankelijk laboratoria van het Duitse testinstituut TÜV, garandeert dat veiligheid centraal staat bij de *Invacare Orion Metro*.

### Eenvoud in onderhoud

Door gebruik van kwalitatief hoogwaardige onderdelen, hebben we de **Orion Metro** zowel betrouwbaar als onderhouds toegankelijk gemaakt. Verwijder eenvoudigweg de bovenkap om toegang te krijgen tot de batterijen, elektronica, motor en kabels.

De elektronica en de motor worden beschermd tegen slijtage en water teneinde de hoognodige werking van de scooter te waarborgen zodat vuiligheid geen onnodige storingen met zich meebrengt.





**4-wiel Orion METRO**



**3-wiel Orion METRO**




### Instellen stuurkolom

Gebruikers kunnen eenvoudig de stuurkolom afstellen op de gewenste positie.



### Ergonomisch stuur

Zorgt voor een eenvoudiger en toegankelijker controle over het stuur.

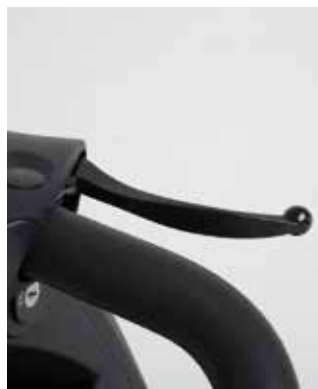

### Handrem

Zorgt voor een onmiddellijke stop indien vereist.



### Remlicht

Een duidelijke, heldere rem rem waarschuwt achterliggers dat de scooter vertraagt.




### Ontkoppelingshendel

Twee-staps vrijloop voorkomt dat de scooter per ongeluk in de vrijloop komt.



### Automatische snelheidsreductie

Vermindert automatisch zijn snelheid in bochten en dit voor een hoger veiligheidsgevoel.

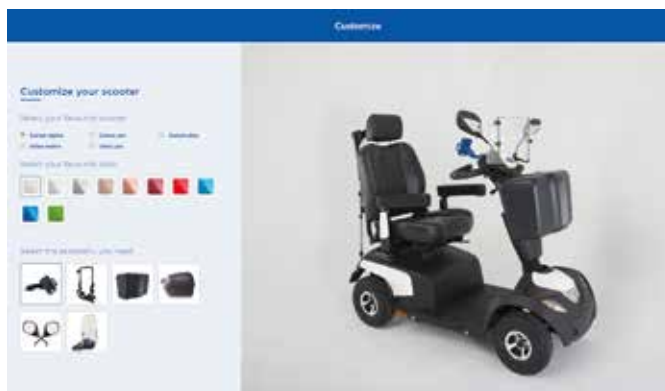








### Personaliseer uw scooter met chassiskleuren en accessoires




Kies uit 10 chassiskleuren en meer dan 25 accessoires om uw scooter aan te passen naar uw persoonlijke stijl. Voor meer informatie, neem een kijkje op [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).

# Technische gegevens

Voor meer informatie, raadpleeg onze website.

	Breedte rugleuning	Zitdiepte	Zitting naar vloerhoogte	Hoogte rugleuning	Breedte Driving unit	Totale lengte	Leeggewicht
<b>3-wiel</b>	 510 mm	 Comfort and Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	 Min. 440 mm Max. 510 mm	 Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	 660 mm	 1240 mm	 103 kg
<b>4-wiel</b>	510 mm	Comfort and Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	660 mm	1270 mm	110 kg

	Het zwaarste deel	Max. gebruikers gewicht	Batterijcapaciteit	Draaicirkel	Max. beklimbaar obstakelhoogte	Bodemspeling	Max. veiligheidshelling
<b>3-wiel</b>	 52 kg	 136 kg	 2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	 2250 mm	 80 mm	 78 mm	 6°
<b>4-wiel</b>	57 kg	136 kg	3 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	260 0mm	80 mm	78 mm	6°

	Max. rijafstand	Max. rijsnelheid	Motorcapaciteit
<b>3-wiel</b>	 54 km	 10 km/u	 10 km/u: 240 W / 600 W <sup>1</sup>
<b>4-wiel</b>	54 km	6 / 10 km/u	6 km/u: 240 W / 500 W <sup>1</sup> 10 km/u: 240 W / 600 W <sup>1</sup>

1. Piek vermogen

## Chassiskleuren



## Bekleding



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
 Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare N.V.  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem  
 Belgium

Trusted Solutions,  
 Passionate People

