



Invacare® | **ORION PRO**

Comfort, veiligheid en betrouwbaarheid  
met extra prestatie



Ideaal voor langere ritten naar de stad of om 's middags rond te rijden in het park met de kleinkinderen. De nieuwe ergonomische **Orion Pro** is een krachtige upgrade van onze **Orion Metro**.

Met een versterkte batterijprestatie, een voortreffelijk veersysteem en de 12" grote wielen, is de nieuwe **Orion Pro** perfect voor gebruikers die behoefte hebben aan extra prestatie.

De **Orion Pro** combineert deze extra prestatie met het reeds bestaand comfort, veiligheid en betrouwbaarheid om de beste keuze te zijn voor gebruikers die meer eisen.



### **Gevorderd veersysteem, soepeler rijden**

Het gevorderd veersysteem van de **Orion Pro** is ontworpen met als doel een beter prestatievermogen en de garantie voor een vlottere rit over verschillende oppervlaktes en terreinen.

Bovendien bezit de **Orion Pro** een krachtige motor en 12" pneumatische banden om ervoor te zorgen dat u comfortabel en met stijl uw bestemming bereikt, of u zich nu in de stad of op het platteland bevindt.

### **Prestatievermogen met zekerheid en veiligheid**

De **Orion Pro** is onderworpen aan de onafhankelijke laboratoria van het Duitse testinstituut TÜV, zodat gebruikers worden gegarandeerd om in alle vertrouwen te rijden met een scooter die voldoet aan de nieuwste European Medical Device Standards.

Bovendien vermindert een ingebouwde automatische snelheidsreductie zijn snelheid in bochten om gebruikers te garanderen dat ze bewust veilige en comfortabele manoeuvres maken.

Daarnaast voorkomt de twee-staps vrijloop hendel dat de scooter uit zichzelf gaat rijden.

### **Snel en eenvoudig in onderhoud**

De **Orion Pro** is vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige onderdelen, die ervoor gezorgd hebben dat het betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk is.

De elektronica en de motor worden extra beschermd tegen slijtage en water teneinde de hoognodige werking van de scooter te waarborgen zodat vuil geen onnodige storingen met zich meebrengt.

De bovenkap kan eenvoudig verwijderd worden om toegang te krijgen tot de motor, batterijen, elektronica en kabels.





**4-wiel Orion PRO**



**3-wiel Orion PRO**




**Instellen stuurkolom**

Gebruikers kunnen eenvoudig de stuurkolom afstellen op de gewenste positie.



**Ergonomisch stuur**

Zorgt voor een eenvoudiger en toegankelijker controle over het stuur.

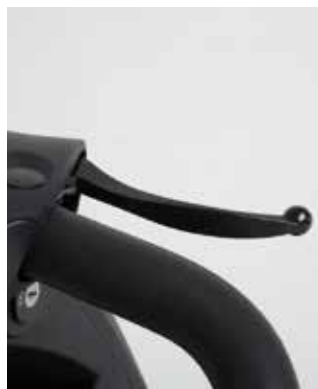

**Handrem**

Zorgt voor een onmiddellijke stop indien vereist.



**Remlicht**

Een duidelijke, heldere rem waarschuwt achterliggers dat de scooter vertraagt.




**Ontkoppelingshendel**

Twee-staps vrijloop voorkomt dat de scooter per ongeluk in de vrijloop komt.



**Automatische snelheidsreductie**

Vermindert automatisch zijn snelheid in bochten en dit voor een hoger veiligheidsgevoel.

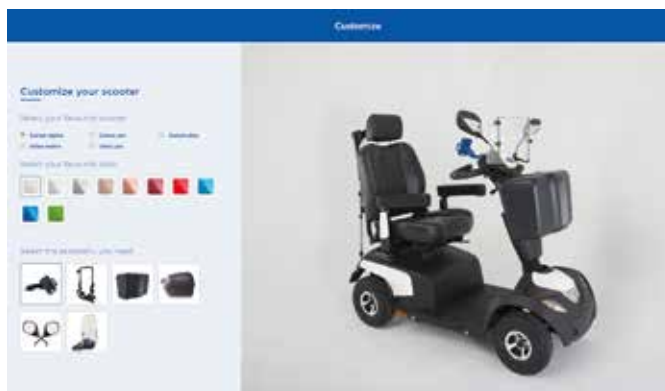

**Personaliseer uw scooter met chassiskleuren en accessoires**

Kies uit 10 chassiskleuren en meer dan 25 accessoires om uw scooter aan te passen naar uw persoonlijke stijl. Voor meer informatie, neem een kijkje op [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).

# Technische gegevens

Voor meer informatie, raadpleeg onze website.

	Breedte rugleuning	Zitdiepte	Zitting naar vloerhoogte	Hoogte rugleuning	Breedte Driving unit	Totale lengte	Leeggewicht
<b>3-wiel</b>	510 mm	Comfort and Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	650 mm	1300 mm	126 kg
<b>4-wiel</b>	510 mm	Comfort and Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	650 mm	1320 mm	136 kg

	Het zwaarste deel	Max. gebruikers gewicht	Batterijcapaciteit	Draaicirkel	Max. beklimbaar obstakelhoogte	Bodemspeling	Max. veiligheidshelling
<b>3-wiel</b>	approx: 62 kg	127 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2500 mm	100 mm	100 mm	10 °
<b>4-wiel</b>	approx: 62 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10 °

	Max. rijafstand	Max. rij snelheid	Motorcapaciteit
<b>3-wiel</b>	52 km	10 / 12.8 / 15 km/u	10 km/u: 240 W / 600 W <sup>1</sup> 12.8 km/u: 550 W / 1600 W <sup>1</sup> 15 km/u: 550 W / 1600 W <sup>1</sup>
<b>4-wiel</b>	52 km	6 / 10 / 12 / 12.8 / 15 km/u	6 km/u: 240 W / 500 W <sup>1</sup> 10 km/u: 240 W / 600 W <sup>1</sup> 12 km/u: 550 W / 1500 W <sup>1</sup> 12.8 km/u: 550 W / 1600 W <sup>1</sup> 15 km/u: 550 W / 1600 W <sup>1</sup>

1. Piek vermogen

## Chassiskleuren



## Bekleding

Zwart vinyl



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare N.V.  
Autobaan 22 - 8210 Loppem  
Belgium

Trusted Solutions,  
Passionate People

