



# ***E-PILOT***

AANKOPPELMOTOR VOOR  
MANUELE ROLSTOELEN

**SPEED  
UP  
YOUR  
LIFE.**

# ONTDEK HET DESIGN

De eerste indruk is overtuigend. De nieuwe e-pilot aankoppelmotor maakt uw rolstoel binnen enkele seconden een sportief voertuig. Het vraagt slechts een paar eenvoudige stappen om de e-pilot aan uw rolstoel te bevestigen. Het zoeken naar een parkeerplaats of de vervelende overstap in en uit de auto zal niet meer nodig zijn. Het stevig frame, de geïntegreerde batterij en het krachtig aandrijfwiel zorgen voor een sportief design met uitstekende ergonomie. Het grote voorwiel zorgt ervoor dat u eenvoudig hobbels en obstakels kunt nemen, zoals stoepranden. Kortom: de e-pilot biedt een milieuvriendelijk mobiliteitsalternatief met maximaal rijplezier!



■ ■ ■ MADE IN GERMANY










JUST KEEP  
ON GOING





3 - - -



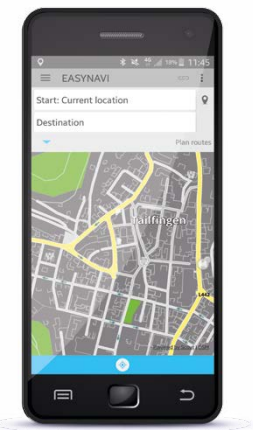

Met easyNavi kunt u uw bestemming eenvoudig bereiken via een rolstoelvriendelijke route. Meer informatie hierover kunt u vinden op pagina 16.



# MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Maak een uitstap naar de stad, bezoek vrienden of ga even met de hond wandelen: de e-pilot maakt het mogelijk. Zelfs langere afstanden zijn geen probleem dankzij de sterke batterij. Wanneer u uw bestemming bereikt, koppel de e-pilot eenvoudig los en gebruik vervolgens uw manuele rolstoel zoals gewoonlijk.





**JUST  
MASTER  
YOUR WAY.**







# GENIET VAN DE **VRIJHEID**

De e-pilot biedt u een nieuwe vorm van mobiliteit. Dankzij het grote voorwiel kunt u uw opties verder uitbreiden: een aardeweg of kasseien zijn niet langer obstakels. Zelfs over een stoeprand rijden, vormt geen probleem. De hoge richtingsstabiliteit is het resultaat van een uitstekende afstelling van het onderstel. Overschrijd grenzen en geniet van uw vrijheid!









JUST  
FASTER...







# BEREIK **SNELLER!**

Het optioneel Mobility Plus Pakket brengt u sneller en met rijplezier naar uw bestemming. Dankzij de combinatie van de Mobility App en de smartphone, krijgt u toegang tot een rolstoelvriendelijke navigatie en een snelheidsuitbreiding tot 20 km/u. De Cruise Control zorgt voor een ontspannende ervaring.

## MOBILITY PLUS PAKKET FUNCTIES



**Rijsnelheid:**  
tot 20 km/u <sup>1)</sup>



**Cruise:**  
Een echte snelheidsregelaar



**easyNavi:** Navigatie voor rolstoelgebruikers



**Telefoon:**  
Oproepen op de display <sup>2)</sup>

Het Mobility Plus Pakket bevat handleidingen en een licentiecode om de extra functies in de gratis Mobility App te ontgrendelen. <sup>3)</sup>

Prijs: **350 euro** incl. BTW  
Voor Android en IOS



<sup>1)</sup> De maximale toegestane snelheid op de openbare weg hangt af van de lokale verkeersregels. Er mag enkel op privéterein gereden worden bij snelheden boven de 6 of 10 km/u. Alber en zijn verkooppartners zijn niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de nationale verkeerswetgeving.

<sup>2)</sup> Enkel met Android.

<sup>3)</sup> Het enige wat u nodig hebt, is een smartphone met internetaansluiting en Bluetooth.







## MOBILITY PLUS PAKKET:


# HANDIGE FUNCTIES

# WANNEER U OP PAD BENT




## RIJSNELHEID

- Verhoog de maximale rij snelheid tot 20 km/u <sup>1)</sup>
- Nieuwe dynamische rij-ervaring met de e-pilot

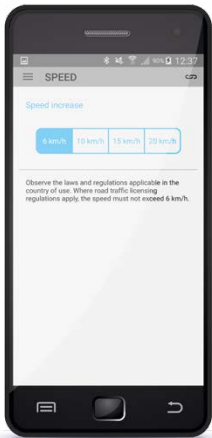


## CRUISE

- Een ingestelde snelheid aanhouden
- Eenvoudig instelbaar in stappen van 1 km/u

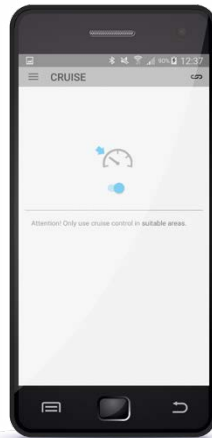

## EASYNAVI

- Eenvoudige navigatie met rolstoeltoegankelijke routekeuzes
- De eerste geïntegreerde navigatie in een aankoppelmotor

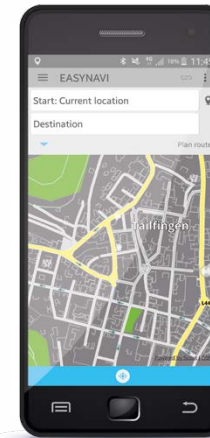

<sup>1)</sup> De maximale toegestane snelheid op de openbare weg hangt af van de lokale verkeersregels. Er mag enkel op privérein gereden worden bij snelheden boven de 6 of 10 km/u. Alber en zijn verkoopspartners zijn niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de nationale verkeerswetgeving.



# DE E-PILOT MOBILITY APP

## DE SLIMME HELPER WANNEER U OP PAD BENT


Download de Mobility App op uw smartphone<sup>2)</sup> en krijg toegang tot een schat aan informatie in één oogopslag. Daarnaast bevat de Mobility App waardevolle tips en tricks voor het dagelijks leven met uw e-pilot.

### GIDS:

- Beknopte gebruiksaanwijzingen
- Foutmeldingen en voorgestelde oplossingen
- Lijst met gespecialiseerde dealers wereldwijd

### COCKPIT: <sup>2)</sup>

- Toont het resterend vermogen en de actieradius
- Kilometer teller
- Registratie van afgelegde afstanden

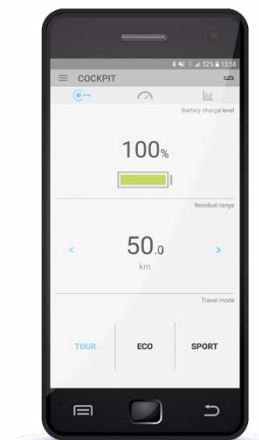

Gratis Download

<sup>2)</sup> Het enige wat u nodig hebt, is een smartphone met internetaansluiting en Bluetooth.

Apple en App Store® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple inc.  
Google en Google Play® zijn geregistreerde handelsmerken van Google inc.





# PERSONALISEER UW E-PILOT

Het sportief, dynamisch voorkomen van de e-pilot wordt benadrukt door de aantrekkelijke designkleuren. Personaliseer uw e-pilot volgens uw wensen en voorkeuren. Alle beschikbare kleuren<sup>1)</sup> zijn te vinden op [www.alber.de](http://www.alber.de).







<sup>1)</sup> Kleuren kunnen enigszins afwijken van de hier afgebeelde voorbeelden. We behouden ons het recht om de kleureselectie te wijzigen op basis van beschikbaarheid.

# MOGELIJKE UITBREIDINGEN

Zelfs in de standaardversie biedt de e-pilot vele handige functies, zoals twee remmen, lichten, claxon, eenvoudig afneembaar batterijpakket, USB-aansluiting voor het opladen van uw smartphone. Met een breed gamma aan accessoires, kunt u uw e-pilot aanpassen aan uw behoeften. Ontdek alle accessoires op [www.alber.de](http://www.alber.de).





# ACCESSOIRES




01 | Boodschappentas 02 | Supernova Voorlicht 03 | Compacte Tas  
04 | Handhulp voor aandrijving 05 | Veiligheidspakket 06 | Achteruitkijkspiegel  
07 | Achterlicht 08 | Flessenhouder 09 | Bagagedrager

## DETAILS

### Bevestig eenvoudig aan de rolstoel

Het modulair montagesysteem maakt de combinatie met verschillende rolstoelmodellen mogelijk. Bevestig de e-pilot eenvoudig aan uw rolstoel.

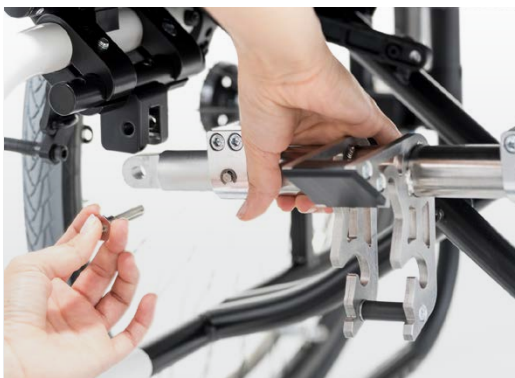

### Bevestigingsmiddelen voor de e-pilot

De zwarte aansluitingen zijn bevestigd aan de zitbuis van de rolstoel. De koppelingssteun is afneembaar. Uw rolstoel blijft opvouwbaar. Afhankelijk van het type rolstoel, voegt deze bevestiging 600 tot 900 gram toe aan de rolstoel.



### Koppel en ontkoppel in twee stappen:

KOPPEL EN ONTKOPPEL IN SLECHTS  
**5 SECONDEN**



1. Trek en vergrendel de positie.



2. Druk naar voren om de positie te vergrendelen en ga vooruit.




## TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht	100 kg
Max. belastend gewicht (stoel en gebruiker)	135 kg
Max. veiligheidshelling	tot 10%
Remvermogen	tot 15%
Rijsnelheid <sup>1)</sup>	tot 20 km/u (met het Mobility Plus Pakket, zie pag. 16)
Actieradius Afhankelijk van het grondoppervlak, het gewicht van de persoon, temperatuur en terrein	tot 50 km
Totale gewicht	18.4 kg
Totale gewicht zonder batterijpakket	15.5 kg

<sup>1)</sup> De maximale toegestane snelheid op de openbare weg hangt af van de lokale verkeersregels. Er mag enkel op privéterein gereden worden bij snelheden boven de 6 of 10 km/u. Alber en zijn verkooppartners zijn niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de nationale verkeerswetgeving.

**CE** Voldoet aan de EU Richtlijn inzake Medische Hulpmiddelen 93/42/EWG

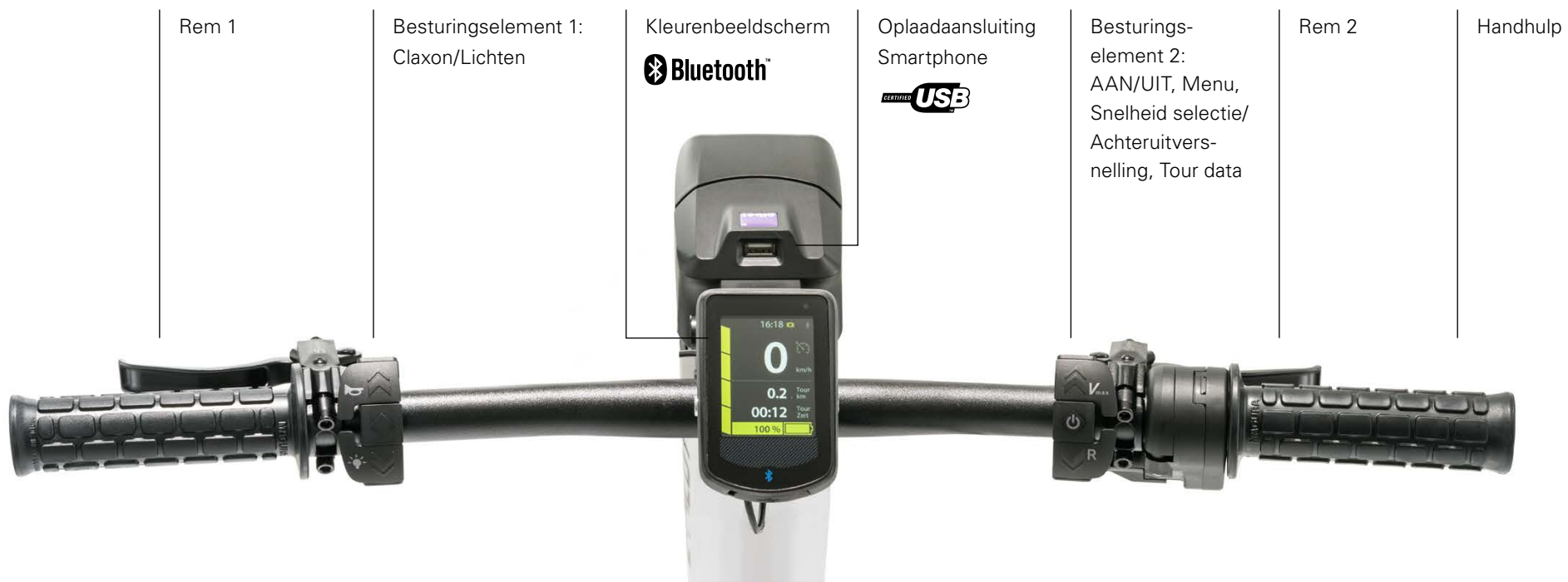

■ ■ ■ MADE IN GERMANY



Geproduceerd in Duitsland door de marktleider in aankoppelmotoren.

## U KUNT OP DE E-PILOT VERTROUWEN

De e-pilot is een product van het bedrijf Alber, de specialist op vlak van bijzonder draagbare en gebruiksvriendelijke mobiliteitshulpmiddelen. Onafhankelijke instellingen hebben de e-pilot getest en beoordeeld op duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Veiligheidstesten staan bij ons op de eerste plaats – bijvoorbeeld door de TÜV: bij Alber ontvangt u altijd geteste productveiligheid volgens de nieuwe richtlijnen voor medische producten.

De e-pilot voldoet aan de Richtlijn 93/42/EEC en Wijzigingsrichtlijn 2007/47/EC voor Medische Hulpmiddelen en is op vrijwillige basis getest door TÜV Süd, volgens de momenteel geldende versie van de productnorm EN 12184.

Onze kwaliteitseis: uw veiligheid! Ons bedrijf is gecertificeerd volgens de huidige norm voor kwaliteitsmanagement ISO 13485:2016 voor medische apparaten. Wij garanderen een milieuvriendelijke productie van onze producten met ons milieubeheersysteem gecertificeerd volgens ISO 14001.



**Invacare N.V.**  
Autobaan 22  
8210 Loppem, Belgium  
Tel.: +32 (0)50 831010  
Fax: +32 (0)50 831011  
belgium@invacare.com

[www.alber.de](http://www.alber.de)