

Medley® Ergo



Barrières *Bella*,
pleine longueur en bois.

La solution pour une multitude
de besoins !



Invacare **Medley® Ergo**

La famille de lits médicalisés **Medley Ergo** offre le parfait compromis entre économie, fonctionnalité et qualité.

Le lit *Invacare Medley Ergo Low* dispose des mêmes atouts que le **Medley Ergo** mais il descend plus bas : rassurant et sécurisant pour les personnes désorientées. Les lits **Medley Ergo** et **Medley Ergo Low** peuvent tous deux évoluer en **Medley Ergo Select**.

Le **Medley Ergo Select** offre un design plus attractif et hôtelier. Tous les lits de la famille **Medley Ergo** sont faciles à transporter et à installer.



Friction et cisaillement : la solution

Les dimensions des différentes parties du plan de couchage sont optimales et ont été réalisées grâce à des études anthropométriques et optimisées avec une nappe de pression pour :

- davantage de confort en position assise
- réduire les forces de friction et de cisaillement
- retarder le glissement vers le pied du lit.

La position fauteuil

Les versions 3 fonctions électriques du lit *Invacare Medley Ergo* permettent une position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature de genoux. Cette fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande pour un usage à domicile.



Lit 3 fonctions avec proclive, barrières **Bella** pleine longueur bois et habillage bois **Select**.

Hauteur réduite du plan de couchage : 210 mm du sol !

La conception des lits de la famille **Medley Ergo** permet de positionner le plan de couchage en position extra basse, intermédiaire ou haute : moins de pénibilité pour le personnel soignant et facilités pour l'utilisateur au moment du transfert. Le panneau permet de choisir entre 2 positions de hauteur pour le plan de couchage.


Toutes les barrières sont conformes à la norme NF EN 60601-2-52 et à la norme 1970/A1.

Caractéristiques et options



Barrières **Bella** bois pleine longueur 2 pans coloris hêtre

Facile à installer sans outils.
Existe également en version longue + 15 cm.
Conformes à la norme NF EN 60601-2-52 et 1970/A1.
Ref: 1560435-0101

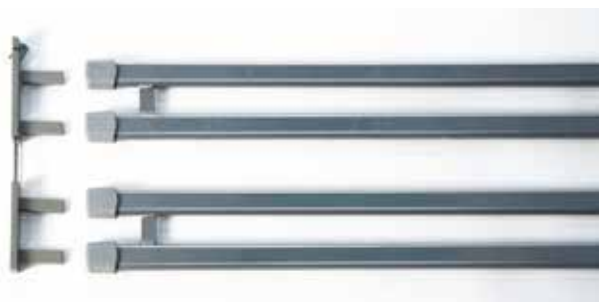

Barrières **Aria** époxy pleine longueur 2 pans coloris gris

Facile à installer sans outils.
Conformes à la norme NF EN 60601-2-52 et 1970/A1.
Ref: 1560076-7042

Options et Configurations



Medley Ergo Low

Davantage de sécurité et de quiétude durant le sommeil pour l'utilisateur lorsque le lit est en position extra basse.

Davantage de confort pour le personnel soignant durant les soins lorsque la hauteur variable du lit est ajustée.

Le **Medley Ergo Low** permet à l'utilisateur d'accéder et de sortir de son lit de manière autonome.

Le **Medley Ergo Low** offre 2 possibilités de hauteur pour le plan de couchage : 210-610 mm ou 280-680 mm.

Medley Ergo et **Medley Ergo Low** sont tous deux disponibles en 2 fonctions électriques évolutif et en 3 fonctions électriques avec proclive.



Idéal pour le domicile

L'habillage bois Select couvrant les panneaux et les vérins s'installe et se démonte autant de fois que vous le souhaitez. Cette version disponible sur **Medley Ergo** et **Medley Ergo Low**, offre un design plus attractif ton hôte.



Habillage bois Select

Convient sur **Medley Ergo** et **Medley Ergo Low**.

Ref: 1177230-0101



Extension en hauteur

+150 mm pour barrières pleine longueur bois, coloris hêtre.

Ref: 1538420-0125



Transport et stockage

Les lits de la famille **Medley Ergo** sont faciles à stocker et à transporter grâce à la livraison type trolley (livraison possible en cartons également).


2 possibilités de hauteur pour le plan de couchage

Medley Ergo : 330-730 mm ou 400-800 mm

Medley Ergo Low : 210-610 mm ou 280-680 mm

Dimensions optimisées des parties du plan de couchage

Réalisées grâce à des études anthropométriques et à une nappe de pression : réduction des forces de friction et de cisaillement pour un confort optimal.

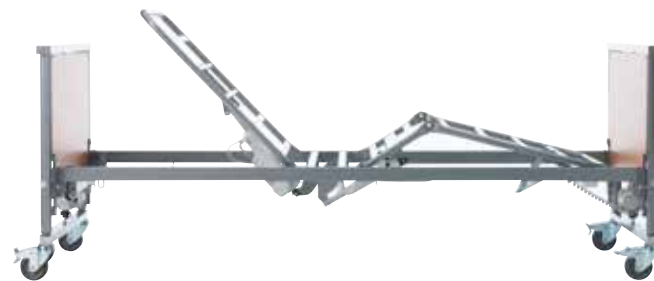

Accessoires



Potence d'angle

Légère et simple d'utilisation.
Ref: 1542093-7042



Kit rallonge

Inserts +15 cm en pied de lit, avec rallonge de plan de couchage.
Ref: 1567889-7042



Kit de transport

Faciliter le stockage et les livraisons.
Réf: 1560399-7042



Télécommande verrouillable

Télécommande avec proclive sur les versions 3 fonctions électriques., Verrouillage individuel des fonctions grâce à une clé indépendante.



Matelas de sol

Idéal pour rassurer le patient ou en cas de chute. Mousse HR. Dimensions: 1970 x 640 X 50 mm.
Réf: 1494608

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Réglage en hauteur	Section de plan de couchage	Relève-buste	Angle de pliquature	Angle repose-jambes
Medley Ergo	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	400 - 800 mm / 330 - 730 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24° (3 fonctions élec.)	0 - 11°
Medley Ergo Low	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	280 - 680 mm / 210 - 610 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24° (3 fonctions élec.)	0 - 11°

	Proclive	Poids total du produit	Poids maxi utilisateur	Partie du plan de couchage la plus lourde
Medley Ergo	11°	64 kg	Charge de fonctionnement 180 kg 145 kg	17 kg
Medley Ergo Low	11°	64 kg	Charge de fonctionnement 180 kg 145 kg	17 kg



Conforme à la norme NF EN 60601-2-52

Coloris plan de couchage et bois

Gris clair

Hêtre



Données électriques :

vérins Linak LA24 IPX4, câbles déconnectables

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.