



Invacare[®] | **Action^{®3} Junior[®]**

Jouw avontuur, jouw manier
Ton avonture, ta façon

Trusted Solutions,
Passionate People



Een lichte, opvouwbare en handbewogen rolstoel die speciaal ontworpen is voor kinderen. De **Action³ Junior** is in staat om mee te groeien met het kind en voor de benodigde klinische ondersteuning te zorgen. / *Un fauteuil ultra-léger, manuel et pliable, spécialement conçu pour des enfants. L'Action³ Junior peut évoluer ensemble avec votre enfant et offre les soins infirmiers nécessaires.*



Telescopisch kruisframe / *Croisillon télescopique*

De verstelbaarheid van de **Action³ Junior** laat deze toe om mee te groeien met uw kind. Zo is de rolstoel uitgerust met een instelbare zitbreedte en zitdiepte.

L'ajustabilité de l'Action³ Junior lui permet d'évoluer ensemble avec votre enfant. Ceci se fait à l'aide de la profondeur et de la largeur d'assise ajustables.



Maak je stoel uniek / *Personnalise ton fauteuil*

De rolstoel werd speciaal ontworpen om aan de eisen van ieder kind tegemoet te komen en om hun eigen stijl te creëren. Er kan gekozen worden uit 3 moderne spaakbeschermers en talrijke accessoires zijn beschikbaar.

La chaise a été spécialement conçue afin de répondre à toutes les demandes de chaque enfant, afin de créer son propre style. On peut choisir parmi 3 protège-rayons modernes et une large gamme d'options est disponible.



Instelbare zithoogte / *Hauteur d'assise réglable*


Om de hoogte te veranderen, kan het achterwiel op 20 verschillende posities gemonteerd worden.

Afin de changer la hauteur, la roue arrière peut être montée à 20 positions différentes.



Spaakbeschermers / Protège-rayons


3 Moderne spaakbeschermers en 6 framekleuren.
3 Protège-rayons modernes et 6 coloris du châssis.

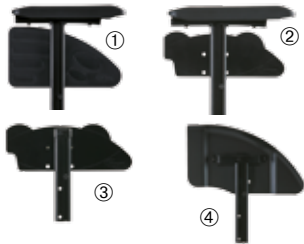

Armsteunen / Repose-bras

Afneembaar en hoogteverstelbaar / Amovibles et réglables en hauteur

- ① Armsteunen / repose-bras
- ② junior armsteunen
- ③ kledijbeschermers / protège-vêtements
- ④ spatborden / garde-boues.

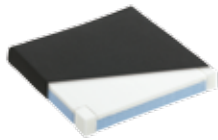

Zitkussen / Coussin d'assise

Een 50 mm foamkussen verkrijgbaar. / Coussin en mousse avec épaisseur de 50 mm est disponible.



Beensteunen / Repose-jambes

- ① Beensteun / repose-jambes 90°,
- ② Beensteun / repose-jambes 80°,
- ③ Comfort beensteun met verstelbare hoek / Repose-jambes de confort avec angle ajustable 0°-80°.



Ergonomische duwhandvaten / Poignées de poussée ergonomiques

Compatibel met alle types rolstoelen. De regelbare hoofdsteun kan ook als rugbeugel gebruikt worden. / Compatibles avec chaque type de fauteuil. L'appui-tête réglable peut aussi être utilisé comme support de dossier.




Voorwielen / Roues avant

3 types voorwielen / de roues avant:
① 5" x 1" met lichtje / à pneus lumineux,
② 5" x 1 3/4" massief / à pneus pleins,
③ 5" x 1" massief / à pneus pleins.



Aanspanbare bekleding / Revêtement ajustable

De rugbekleding kan aangepast worden met behulp van velcro. La tension du revêtement du dossier est réglable par velcro.

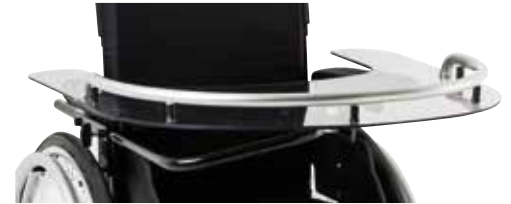

Dienblad / Tablette

Naast het standaard dienblad, ook een wegzwenkbaar dienblad beschikbaar. / En addition de la tablette standard, une tablette escamotable est disponible.



Abductie beensteunpositie / Position d'abduction repose-jambes

Een 30° abductiepositie is mogelijk met 80° beensteunen. / Les repose-jambes de 80° permettent une abduction de 30°.



Transitversie / Version transit

Zithoogte 460 mm en 12" plastic achterwielen. / Hauteur d'assise 460 mm et roues arrière en plastic de 12".



Enkelbanden / Appui-chevilles

Verkrijgbaar in 3 maten. Helpen voeten te positioneren en te ondersteunen. / Disponibles en 3 tailles. Aide à positionner les pieds et soutiennent les enfants atteints des spasmes.










Stabilisatiekit voorzijde / Kit de stabilisation avant








Om de stabiliteit te vergroten bij actieve kinderen. / Pour améliorer la stabilité des enfants actifs.






Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Voor meer informatie, kunt u steeds onze website raadplegen.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web.

						
Evolutive 205 / 230 / 255 / 280 / 305 / 330 / 355 / 380 mm	200 - 250 / 250 - 300 / 300 - 350 / 275 - 325 / 325 - 375mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°
Standard 305 / 330 / 355 / 380 mm	250 - 300 / 300 - 350 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°

						
Evolutive 125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Seat width + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	740 - 965 mm	510 - 740 mm	870 - 1130 mm
Standard 125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Seat width + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	900 - 1000 mm	670 - 770 mm	870 - 1130 mm

				
Evolutive 12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 ¹ kg	8.5 / 12 ¹ kg
Standard 12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 ¹ kg	8.5 / 12 ¹ kg

1. Transit versie / Version transit



Framekleuren / Coloris du châssis

Pearl White


Matt Black

Matt Red

Intense Yellow


Polar Blue

Candy Pink

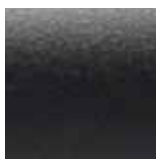

Bekleding / Revêtement

Black Nylon

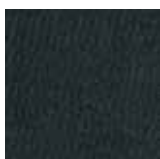

Tel: +32 (0)50 83 10 10
Fax: +32 (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V. /S.A.
Autobaan 22
8210 Loppem
België / Belgique



Yes, you can.®

