



AQUATEC®

Ocean Ergo

Une gamme avancée de chaises de douche modulaires

Solutions de soins personnels haut de gamme

Ergonomique, polyvalent et facile à manœuvrer



Yes, you can.®

Une polyvalence encore plus grande et des améliorations ergonomiques

Notre toute dernière gamme Aquatec Ocean Ergo a été spécialement conçue pour faciliter la douche et la toilette.

Qu'il s'agisse d'une chaise de douche standard à propulsion manuelle ou du modèle équipé du mécanisme de bascule d'assise, Ocean Ergo offre une solution pour presque tout le monde.

En collaboration avec de nombreux thérapeutes, nos objectifs de conception étaient axés sur l'ergonomie ainsi que sur le mode de vie et le bien-être des patients.

Chaque modèle de la gamme Ocean Ergo est optimisé grâce à de nouveaux designs pour atteindre de plus hauts niveaux de sécurité, de confort et de soutien.

Que les soins personnels soient effectués de manière indépendante ou avec l'aide d'un soignant, chacune de nos chaises hautement modulaire offre une solution idéale.

Les modèles à bascule d'assise offrent des solutions de maintien supplémentaires en position assise

Ocean VIP Ergo et Ocean Dual VIP Ergo possèdent une bascule d'assise à translation de -5° à 40° avec un mécanisme intelligent de transfert de poids qui assure une stabilité optimale avec un faible encombrement.


L'Ocean Dual VIP Ergo est multifonctionnel. L'inclinaison et le mécanisme de bascule permettent à l'angle de l'assise et du dossier de s'étendre de 5° et 35° et de se régler très simplement grâce à la légèreté de la structure du fauteuil.



NOUVELLES caractéristiques

Système d'accoudoirs amélioré

- > Les accoudoirs nouvellement conçus offrent un soutien et un confort accrus pour l'utilisateur. Les nouveaux coussins d'accoudoir, en option, offrent une surface et une position de repos plus douces et confortables. Les accoudoirs sont accompagnés d'un système de verrouillage de sécurité intégré en option.

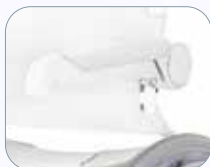**Réduction de la hauteur du siège**

- > Un réglage supplémentaire de la hauteur du siège par rapport au sol a été introduit pour promouvoir des transferts sûrs et indépendants. Le châssis peut être abaissé encore plus, s'adaptant ainsi aux personnes de petite taille. Réglage également disponible sur l'Ocean Ergo XL.

**Fonction d'arrêt de l'inclinaison**

- > Une fonction optionnelle facile à utiliser qui empêche la structure de s'incliner vers l'avant au-delà de 0°. Cela garantit que le cadre reste horizontal par rapport au sol et constitue une aide pour les personnes qui sont hissées dans ou hors du fauteuil.

**Support d'appui-tête ergonomique**

- > Avec une multitude de réglages différents, le support d'appui-tête ergonomique offre un soutien postural supérieur pour la tête et le cou. Les ajustements sont rapides et faciles. En tournant simplement les vis à main intégrées, le support d'appui-tête permet l'obtention de la position correcte pour l'individu. Ce support est idéal pour les praticiens grâce à sa mise en place simple, sans outils.





Assise ergonomique innovante

- > Le design a été développé pour procurer une position assise plus confortable et sécurisante, favorisant l'indépendance de l'utilisateur ainsi que son confort.
- > Conçu à partir des empreintes que les gens laissent derrière eux lorsqu'ils s'assoient.
- > Une inclinaison de 5° du siège permet de relever les genoux dans une position adaptée pour la toilette.
- > La stabilité améliorée à l'avant de la base permet un encombrement réduit et assure aux utilisateurs une sécurité lorsqu'ils sont assis sur la chaise



Hautement configurable

- > Disponible avec une gamme d'accessoires de positionnement, de toilette et d'assise afin de répondre à un large éventail de besoins posturaux.



Extrêmement stable

- > Structure en acier inoxydable à stabilité renforcée pour plus de sécurité.



Facile à manipuler

- > Un encombrement réduit et compact et un empattement optimisé rendent la chaise facile à manœuvrer dans les petits espaces.
- > Démontage facile pour le le transport et le stockage.

Présentation de notre dernière gamme **Ocean Ergo**

Découvrez la gamme complète ci-dessous, y compris les accessoires en option pour des besoins spécifiques.



Ocean Ergo

Un modèle transit entrée de gamme



Ocean Ergo XL

Un modèle transit entrée de gamme, avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur plus élevé



Ocean 24" Ergo

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle



Ocean VIP Ergo

Conçue pour les utilisateurs nécessitant plus de maintien en position assise



Ocean Dual VIP Ergo

Conçue pour les utilisateurs ayant des besoins de positionnement et de maintien plus complexes

Données Techniques

Pour plus de renseignements, rendez vous sur notre site internet www.invacare.be/fr.
Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Largeur d'assise ▼



Profondeur d'assise ▼



Largeur hors-tout ▼



Profondeur hors-tout ▼



Largeur entre les accoudoirs ▼

	Largeur d'assise ▼	Profondeur d'assise ▼	Largeur hors-tout ▼	Profondeur hors-tout ▼	Largeur entre les accoudoirs ▼
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	475 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	555 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	475 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Angle d'inclinaison d'assise ▼



Angle d'inclinaison de dossier ▼




Poids total ▼



Poids max. utilisateur ▼

	Angle d'inclinaison d'assise ▼	Angle d'inclinaison de dossier ▼	Poids total ▼	Poids max. utilisateur ▼
Ocean Ergo	-	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	-	-	18 kg	180 kg
Ocean 24" Ergo	-	-	23 kg	150 kg
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg

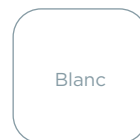

Blanc

Coloris de châssis

Tél.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique