

Comet[®] Ultra

Performance et fiabilité renforcées



Yes, you can.

Idéal pour les personnes à forte corpulence, le Comet® ULTRA offre une expérience de conduite puissante, confortable, en toute sécurité sans compromis sur le style ou les fonctions. En incluant les mêmes caractéristiques de sécurité et de conduite que toute la Comet® family, le Comet® ULTRA vous emmènera à destination rapidement, confortablement et tout en contrôle.

Caractéristiques et options



Suspensions améliorées

Les suspensions améliorées offrent un confort idéal aux personnes de forte corpulence



Colonne de siège renforcée

Pour plus de stabilité et de sécurité pour l'utilisateur.

Accoudoirs renforcés, réglables en hauteur et en largeur

Ils peuvent être facilement réglés pour l'utilisateur et lui offrir plus de soutien lorsqu'il s'assoit et se lève du scooter.

Puissance, fiabilité et personnalisation
















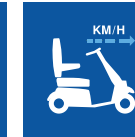

Grâce à une attention particulière portée à son design et sa construction robuste, la sécurité et la stabilité du Comet® ULTRA deviennent des atouts ; même pour les utilisateurs jusqu'à 220kg. Développé avec des composants de qualité, le Comet® ULTRA est le compagnon qui vous emmènera où vous souhaitez. De plus, sa flexibilité et son adaptabilité vous permettent de le personnaliser selon votre style et vos préférences.

Soutien et confort

L'assise enveloppante Ultra a été conçue en partenariat avec des ergothérapeutes pour optimiser la position assise et augmenter son confort. De plus, l'assise est équipée d'une pompe de réglage de la zone lombaire pour améliorer le confort. La base de l'assise renforcée et les accoudoirs réglables permettent un excellent maintien et peuvent servir d'appui.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr.

	Largeur de dossier	Profondeur d'assise	Hauteur sol/plancher	Hauteur de dossier	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du scooter	Poids de la partie la plus lourde
Comet ULTRA	 660 mm	 470 mm	 Min. 440 mm Max. 510 mm	 515 mm	 665 - 685 mm	 1450 mm	 148 kg	 circa 63 kg
Comet ULTRA	Poids max. utilisateur	Batteries	Diamètre de giration	Franchissement	Garde au sol	Pente max. sécurité	Autonomie	Vitesse
Comet ULTRA	 220 kg	 2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	 2750 mm	 100 mm	 100 mm	 10 °	 49 km	 10 km/h
Comet ULTRA	Moteurs	Coloris			Revêtement			
Comet ULTRA	 10km/h: 650 W / 1800 W ¹	Rouge Grenat	Diamant Argent	Bleu Alium	Vinyle Noir			

1. Pic de performance

Tél: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



Yes, you can.®

