

Birdie[®]EVO



Un design optimisé pour des transferts
en toute sécurité



Yes, you can.

L'Evolution du lève-personnes passif

La nouvelle **Birdie^{EVO} Family** a été conçue pour offrir des caractéristiques techniques alliant à la fois nouvelle technologie, confort et sécurité lors du levage et des transferts au lit ou depuis le lit, depuis une chaise ou depuis le sol.

Inspiré du renommé **Birdie**, le développement de cette nouvelle gamme a été guidé par les retours des utilisateurs, mais aussi par les points forts du Birdie, tout en apportant de nouvelles spécificités techniques destinées à améliorer l'expérience du patient et du soignant.

Augmenter le confort

La gamme **Birdie^{EVO}** dispose d'un système de levage ergonomique qui permet facilement de faire pivoter le patient à 360°. Cette rotation rend le positionnement beaucoup plus simple pour le soignant et réduit l'anxiété pour le patient.

Optimiser l'espace


L'amplitude de la flèche offre un large espace au patient même lorsque la position de levage est à son maximum. L'espace est également optimisé au niveau du vérin limitant ainsi les risques de blessure aux genoux pour le patient.



Facile à manoeuvrer, transporter et stocker

Birdie^{EVO} se plie et se déplie très simplement en toute sécurité grâce au système de verrouillage Snap Lock, ce qui assure un transport et un stockage optimal. Si besoin, le mât peut être démonté aisément sans outil.

Le **Birdie^{EVO} COMPACT** est, grâce à son poids de seulement 31 kg, encore

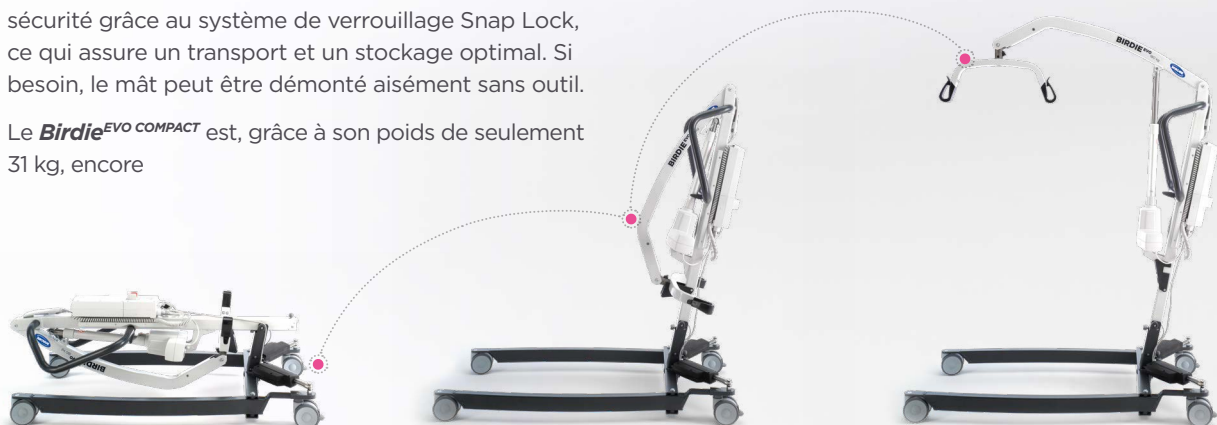

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS



Slow'R®

- ▶ Amortisseur intégré: diminue considérablement les mouvements de balancier.



SMARTLOCK®

- ▶ Avec le mécanisme de démontage rapide, le changement de fléaux se fait rapidement, sans outil et en toute sécurité.



Design des crochets

- ▶ Avec le nouveau design des crochets, l'accroche des sangles se fait très simplement et en toute sécurité.

NOUVELLES caractéristiques supplémentaires



- ▶ Poignée de guidage ergonomique pour faciliter la préhension et la manipulation.



- ▶ Le design incurvé de la flèche et du fléau permet au soignant de maintenir un contact visuel avec le patient tout au long du transfert.



- ▶ Grâce à leurs angles arrondis et leurs courbes naturelles les pieds du **Birdie^{EVO}** apportent un sentiment de confort et facilitent les mouvements autour d'un fauteuil lors du positionnement.



Aperçu des principales caractéristiques

De la flèche à la sangle en passant par le fléau...



◀ **Slow'R®** BREVETÉ Réduit le mouvement de balancier

Un nouvel amortisseur a été développé et intégré à la flèche pour réduire l'oscillation du patient afin de lui offrir un transfert confortable et d'apporter au soignant un meilleur contrôle dans les déplacements et le transfert.



◀ **SMARTLOCK®** BREVETÉ Simplifie et sécurise le verrouillage

Un nouveau mécanisme de démontage rapide permet de changer le fléau simplement et en toute sécurité sans aucun outil. Pour assurer une totale sécurité, la connexion entre le fléau et la flèche se fait grâce à un système de glissière, lui-même sécurisé grâce à une goupille de surêté.



◀ **Nouveaux crochets designs** Facilite l'accroche des sangles

De nouveaux crochets designs permettent à présent d'accrocher la boucle de la sangle avec une seule main. Le crochet plus large, permet de positionner la boucle plus facilement tandis que le haut du crochet a été conçu avec un anti-retour pour prévenir toute sortie de la sangle et ainsi prévenir les risques d'accidents.

Découvrez la **Birdie^{EVO}** Family

**La gamme des lève-personnes passifs.
Conçue pour les patients et les aidants.**



Birdie^{EVO}

▲ **La nouvelle référence de lève-personnes**

Une version évoluée du Birdie, leader sur le marché des lève-personnes passifs, conçu pour réaliser des transferts sûrs à la fois au domicile et également en collectivité.



Birdie^{EVO COMPACT}

▲ **Des pieds raccourcis pour une meilleure maniabilité**

Sa petite taille, permet au Birdie^{EVO COMPACT} de facilement réaliser des transferts dans les espaces réduits.

Amplitude du mât ▶ 415 - 1660 mm

▶ 530 - 1590 mm

Poids max. utilisateur ▶ 180 kg

▶ 150 kg

Rayon de braquage ▶ 1400 mm

▶ 1070 mm


Options et accessoires disponibles:

- ▶ Écartement manuel ou électrique des pieds
- ▶ Descente d'urgence électrique ou manuelle
- ▶ Verrouillage automatique du mât lors du pliage et dépliage
- ▶ Large gamme de sangles disponibles en plusieurs tailles et différents tissus
- ▶ Levier disponible en option pour l'écartement manuel des pieds
- ▶ Système de pesée homologué Classe III médicale ou destiné à une utilisation à domicile



Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

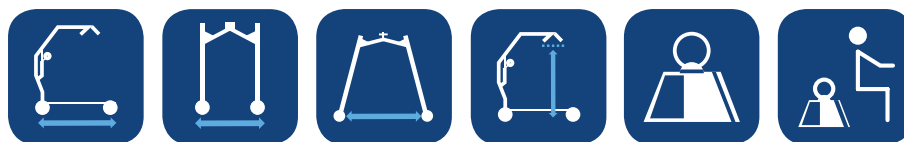

Longueur hors-tout de la base ▼ Largeur intérieure: pieds fermés ▼ Largeur intérieure: pieds ouverts ▼ Hauteur min. et max. ▼ Poids total du produit ▼ Poids max. utilisateur ▼

Birdie^{EVO}	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg
Birdie^{EVO COMPACT}	1080 mm	520 mm	815 mm	530 - 1590 mm	31 kg	150 kg



Hauteur des pieds ▼ Distance du sol ▼ Hauteur une fois plié ▼ Rayon de braquage ▼ *Nombre de cycles ▼ Diamètre des roues ▼

Birdie^{EVO}	115 mm	35 mm	455 mm	1400 mm	40 cycles	100 mm
Birdie^{EVO COMPACT}	115 mm	35 mm	455 mm	1070 mm	40 cycles	100 mm

Tous ces mesures ont été effectuées avec des roues de 100 mm et un fléau 2 points.
Pour des roues de 75 mm, réduire 15 mm pour les mesures de hauteur.

*Pour une batterie chargée entre 100% et 50%

Coloris ▼



Gris clair:
mât, flèche et fléau

RAL: 7035



Gris foncé:
Pieds et poignée de guidage

RAL: 7016

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Normes ▼



Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



© 2021 Invacare International Sàrl. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.
Birdie Evo - BE - 02/23

Yes, you can.®