

# NordBed™ Ultra



TECHNOLOGIE ERGOMOVE™ | PRÉVENTION DES CHUTES |  
INDÉPENDANCE



## NordBed Ultra innovant

Les clients d'une maison de repos ont besoin d'outils pour répondre à leurs besoins. Surtout ceux qui dépendent des autres et des personnes atteintes de démence. Pour eux, le NordBed Ultra est le choix parfait, en raison des nombreuses options de personnalisation. Ce lit a également une apparence conviviale, idéal pour créer une sensation de maison dans une maison de repos. La régression automatique intégrée avancée réduit considérablement les forces de cisaillement lorsque le patient est assis. NordBed favorise la mobilité, permet l'indépendance et répond aux besoins des utilisateurs. Cela fait le NordBed Ultra un bon lit de soins pour les clients et les soignants.

## Technologie ErgoMove

L'Invacare NordBed Ultra est doté de la technologie ErgoMove pour ramener confortablement le patient d'une position allongée à une position assise et active et en appuyant sur un bouton. En position assise active, le client peut facilement manger, boire et lire, tout en assurant une bonne répartition de la pression.

L'ordre de mouvement aide le patient à rester dans la bonne position et à ne pas glisser jusqu'au bout du pied. En combinaison avec l'auto-régression intégrée, cela se traduit par des forces de cisaillement beaucoup moins importantes et une meilleure répartition de la pression lorsque le patient est placé en position assise. Cette fonctionnalité intuitive réduit le besoin de repositionner les clients, ce qui nécessite moins de mains sur le lit. La longueur optimisée du plan de couchage a été déterminée selon les statistiques anthropométriques, ce qui les rend adaptées à la plupart des adultes.

**BREVET DEMANDÉ**



## Sécurité, indépendance et mobilité

### Le NordBed Ultra a un réglage le plus bas de seulement 25 cm :

- ▶ Plus de sécurité et moins de risques pour les personnes qui ont tendance à tomber du lit
- ▶ Empêche les chutes sans l'utilisation de rails latéraux, ce qui est un avantage important pour les personnes atteintes de démence
- ▶ Simplifie l'entrée et la sortie du lit des clients
- ▶ Permet même aux petits clients de placer leurs deux pieds au sol en toute sécurité lorsqu'ils se lèvent du lit

### Up-and-Out™

- ▶ Pour fournir un transfert sûr et fluide qui permet l'indépendance et la mobilité, les clients peuvent activer la fonction Up-and-Out sur simple pression d'un bouton. Les parties mobiles du lit s'ajustent ensuite automatiquement dans une bonne position pour soutenir le transfert dans et hors du lit avec des forces de cisaillement minimales

### Design

- ▶ Le NordBed Ultra est disponible dans une variété de styles modernes, de finitions en bois et de couleurs. Selon les besoins et les goûts personnels, le NordBed Ultra peut être équipé de panneaux latéraux, de barrières plus encore



## Parfait pour toutes sortes de clients

- ▶ La basse hauteur de transfert offre un environnement sûr pour les personnes mobiles
- ▶ Ce lit peut être configuré de plusieurs façons :
  - Pour ressembler à un lit traditionnel
  - Pour bien s'intégrer dans un environnement familial pour une bonne reconnaissance
  - Avec une gamme de couvertures souples (texture haute / basse) pour un environnement familial et sûr
  - Éclairage sous le lit pour minimiser le risque de blessure pour le patient en entrant et en sortant du lit

### 4

### CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

1

#### Technologie ErgoMove

- ▶ Déplace le patient dans une position assise confortable et revient en position couchée sans avoir à être repositionné
- ▶ Réduit le glissement

3

#### Up-and-Out

- ▶ Pour des transferts sûrs et fluides
- ▶ Soutient le mouvement ergonomique

2

#### 25 cm position la plus basse

- ▶ Avec roues standard de 10 cm pour des transferts en toute sécurité et une meilleure prévention des chutes

4

#### Longueur optimisée du plan de couchage

- ▶ Selon les statistiques anthropométriques, pour plus de confort

### Caractéristiques supplémentaires

- ▶ **RememberMe™ (en option)**
  - Télécommande LCD programmable
  - ErgoMove et Up-and-Out peuvent être adaptés aux besoins individuels
- ▶ **Extension plan de couchage intégrée (standard)**
  - 10 cm supplémentaires à la tête et au pied pour les clients plus grands
- ▶ **Anti-Trendelenburg et Trendelenburg (en option)**
  - Aide les soignants à repositionner le client au lit
  - Facile à répartir la pression
- ▶ **Éclairage sous le lit (en option)**
  - Facile à allumer la lumière
  - Prévention des chutes



## Télécommande ▲

Couleurs faciles à reconnaître pour les clients ayant une vision réduite

- ▶ Les boutons principaux, les plus couramment utilisés, ont des couleurs clairement reconnaissables. Ces couleurs ont été choisies en collaboration avec des experts
- ▶ Lors de la sélection d'une fonction, tous les boutons s'allument lorsqu'un bouton est enfoncé. Cela garantit une reconnaissance facile le jour et la nuit
- ▶ Pour une sélection facile, les boutons principaux sont placés en haut de la commande et les propriétés de réglage sont placées sous les boutons haut / bas
- ▶ La commande est verrouillable en standard

## Données techniques ▼


Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr).  
Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.




Largeur ext.  
Largeur int. ▼



Longueur ext.  
Longueur int. ▼

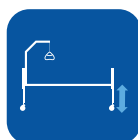


Réglable en  
hauteur ▼

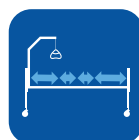

Dimensions plan  
de couchage ▼



Espace libre  
sous le lit ▼

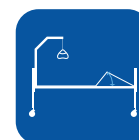

Angle de hanche  
▼

**NordBed Ultra**

100 / 90 cm

213 / 200 cm

25 - 85 cm

80-17-30-65 cm

15 cm

0 - 49°



Angle relève-  
jambes ▼



Anti-  
Trendelenburg  
/ Trendelenburg ▼



Poids max.  
utilisateur ▼



Poids total (sans  
barrières) ▼



Partie la plus  
lourde du  
produit ▼



Lavable en  
machine ▼

**NordBed Ultra**

0 - 19°

+/- 15°


200 kg

105 kg

55 kg

Oui

## Coloris plan de Boiserie ▼ couchage ▼

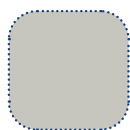

Aluminium  
gris



Hêtre



Chêne



Ombre

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be

Invacare SA  
Autpnaam 22  
8210 Loppem  
Belgique



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.  
Nordbed Ultra - BE - 06/2020