

Cosy Up



Très confortable et personnalisable !



Yes, you can.

Le fauteuil releveur Cosy Up apporte un maximum de confort grâce à sa véritable assise couette et sa continuité entre l'assise et le repose-pieds. Son look moderne et épuré convient au plus grand nombre et lui permet de trouver facilement sa place dans tout type d'environnement.

Dossier réglable en profondeur de série

Grâce à ses deux pattes de fixation, le dossier du Cosy Up est réglable en profondeur très simplement.

Ainsi, ce fauteuil releveur s'adapte parfaitement à toutes les morphologies, aussi bien aux plus petites (avec la profondeur 450 mm), qu'aux plus grandes (avec la profondeur 540 mm).



Fonction dos au mur

Grâce à la fonction dos au mur, de série sur la version 1 moteur du Cosy Up, le dossier du fauteuil releveur peut être placé très près d'un mur sans que cela n'entrave la parfaite utilisation de toutes les fonctions.

Grâce à une conception optimisée pour les petits espaces, seulement 9 cm sont nécessaires entre le mur et le fauteuil pour permettre une inclinaison totale du dossier.



Deux largeurs d'assise

Le fauteuil releveur Cosy Up est livré avec une paire d'accoudoirs rembourrés. La paire d'accoudoirs fins est disponible en accessoires afin de bénéficier de deux largeurs d'assise. Tous deux se fixent sur les accoudoirs rigides grâce à un système de velcro et de zip. Ils sont donc interchangeables très facilement.



Caractéristiques et Options ▼

Revêtements amovibles pour lavage en machine

Les accoudoirs, le dossier et l'assise couette sont fixés sur la base du fauteuil releveur grâce à des systèmes de zip et de velcro.

Tous ces éléments sont donc amovibles très facilement, ce qui permet le lavage en machine à 30° ou 40° selon les tissus.



La télécommande toujours à portée de main

Pratique, grâce à la conception des accoudoirs, l'utilisateur a la possibilité de placer la télécommande du fauteuil (ou celle de la télévision) sous les revêtements d'accoudoirs.

Ainsi, la télécommande est toujours accessible !



Grandes pochettes latérales

Fauteuil équipé de deux pochettes, une à gauche, l'autre à droite, pour y mettre des magazines ou des petits objets.



Version 1 moteur

Télécommande ergonomique 2 boutons rétroéclairés, simple d'utilisation.



Version 2 moteurs

Télécommande ergonomique 4 boutons avec port USB intégré de série, simple d'utilisation.

Caractéristiques et Options ▼

Tissus EasyClean : nettoyable à l'eau !

Tissu antibactérien et déperlant, traité spécialement pour un nettoyage à l'eau. Les tissus EasyClean permettent d'enlever les tâches quotidiennes comme le café, le chocolat ou encore le vin uniquement avec un linge propre et de l'eau. Le tissu EasyClean empêche les tâches de pénétrer dans le tissu et protège ainsi durablement le fauteuil.

Pratique et esthétique, ce tissu anti-tâche prévient la moisissure et résiste au feu conformément aux normes non feu 1021-1 et 1021-2. Lavables en machine jusqu'à 40°C et aptes au sèche-linge, les coussins EasyClean tendances et confortables font du **Cosy Up**, le fauteuil idéal pour une utilisation en collectivité, en EHPAD et en maisons de retraite !



EasyClean Ocean



EasyClean Turquoise



EasyClean Taupe



EasyClean Gris clair



EasyClean Anthracite

Cosy Up : mixez, choisissez et changez de coloris suivant vos humeurs !

Avec ses **6 choix de coloris de coussins et ses 3 choix de bases**, le **Cosy Up** est LE fauteuil releveur **configurable**. Changez de housse comme d'humeur et transformez votre intérieur en seulement quelques minutes. La configurabilité du **Cosy Up** permet au distributeur, dans un espace réduit, de présenter plusieurs coloris en changeant uniquement le coussin (gains de place et d'inventaire !).

Vous pouvez commander au choix soit un fauteuil complet ou bien créer le fauteuil qui vous plaît, en sélectionnant la base et en choisissant les coussins que vous souhaitez : vous pouvez maintenant changer autant de fois que vous le voulez !

Bases ▼



Base télécommande 1 moteur PVC Taupe



Base télécommande 2 moteurs PVC Taupe



Base télécommande 1 moteur PVC Gris Foncé

Coussins ▼




EasyClean Ocean

anti-feu 1021-1 et 1021-2



EasyClean Turquoise

anti-feu 1021-1 et 1021-2

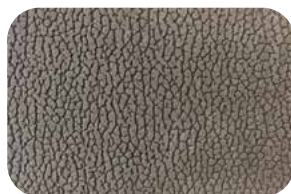

EasyClean Taupe

anti-feu 1021-1 et 1021-2



EasyClean Anthracite

anti-feu 1021-1 et 1021-2



EasyClean Gris Clair

anti-feu 1021-1 et 1021-2



Microfibre Taupe



PVC/Polyester Taupe

Données techniques ▼

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.be/fr.



Position Relax ▼



Position Releveur ▼



Position Repos ▼



Continuité entre l'assise et repose-pieds ▼



Profondeur d'assise ▼



Hauteur d'assise ▼



Largeur d'assise ▼



Inclinaison maximum du dossier ▼

	Position Relax ▼	Position Releveur ▼	Position Repos ▼	Continuité entre l'assise et repose-pieds ▼	Profondeur d'assise ▼	Hauteur d'assise ▼	Largeur d'assise ▼	Inclinaison maximum du dossier ▼
1 moteur	◆	◆		◆	450 ou 540 mm	480 mm	450 ou 530 mm	120°
2 moteurs	◆	◆	◆	◆	450 ou 540 mm	480 mm	450 ou 530 mm	135°



Hauteur hors tout ▼



Largeur hors tout ▼



Profondeur hors tout fermé ▼



Profondeur hors tout ouvert ▼

Recul nécessaire pour inclinaison maximale ▼



Hauteur sol/accoudoirs ▼



Poids max. utilisateur ▼



Poids du produit ▼

Densité de la mousse ▼

1 moteur	1050 mm	770 ¹ / 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm	640 ¹ / 700 mm	125 kg	57 kg	Assise 28kg/m ³ Accoudoirs 18kg/m ³
2 moteurs	1050 mm	770 ¹ / 800 mm	910 mm	1720 mm	460 mm	640 ¹ / 700 mm	125 kg	57 kg	Assise 28kg/m ³ Accoudoirs 18kg/m ³

1. Sans rembourrage d'accoudoir

Tél. : +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



Yes, you can.

