



**rea**

Confidence in posture solutions

**rea**

# Azalea<sup>®</sup> / Azalea<sup>®</sup> Assist

Diverse verstelmogelijkheden  
voor extra comfort

Trusted Solutions,  
Passionate People



Yes, you can.<sup>®</sup>

De **Rea Azalea** is de keuze voor elk type gebruiker. Deze stoel beschikt over unieke kenmerken om aan alle behoeften van de gebruiker te voldoen en om hen extra comfort te bieden. Met uitstekende hanteerbaarheid is de **Azalea** de ideale keuze voor comfort en optimale positionering. De **Rea Azalea Assist** is ook verkrijgbaar in de alternatieve transit uitvoering met kleine achterwielen (16"). De **Flex 3** is hoogte- en breedteverstelbaar en past zich aan elke lichaamsvorm aan. De stoel is beschikbaar in vijf chassiskleuren en drie rugbekledingen.

## Unieke kantelmechanisme DSS (Dual Stability System)

De **Rea Azalea** en **Rea Azalea Assist** hebben een instelbare zitkanteling tot 25° en een rugkanteling tot 30° die zowel manueel als elektrisch ingesteld kunnen worden. De elektrische versie biedt extra autonomie zodat de gebruiker zelfstandig kan handelen.

De compensatierugleuning volgt de natuurlijke beweging van de rug bij rugkanteling en voorkomt afsnijdingen en wrijvingen. Dankzij de verstelbare zit-unit biedt deze stoel een zeer goede verdeling van het lichaamsgewicht en een hoge stabiliteit.

## Kenmerken en opties



### Flex 3 rugplaat

Verstelbaar in hoogte en breedte.



### Flex 3 drukverstelbare rugleuning

De multiverstelbare rugleuningen passen zich aan elke lichaamsvorm aan.



### Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en accessoires zijn beschikbaar voor extra personalisering en om in alle behoeften te voorzien.

## Technische gegevens

Raadpleeg onze website op [www.invacare.be](http://www.invacare.be) voor meer informatie.

	Breedte rugleuning	Zitdiepte	Zitting naar vloerhoogte	Hoogte rugleuning	Hoogte armleuningen	OL	Zithelling	Rughelling
<b>Rea Azalea &amp; Azalea Assist</b>	390-440/ 440-490/ 490-540 (390-490/440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400 / 450 mm	rugplaat: 560-790 mm Drukverstelbare rugleuning: 540-715 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° - 23° (+1° - 25°)	0°-30°
	Totale breedte	Totale hoogte	Totale breedte met zwenkarm	Gewicht	Max. gebruikersgewicht	Transportgewicht	Getest tegen botsingen	Max. helling bij parkeerremmen
<b>Rea Azalea &amp; Azalea Assist</b>	Zitbreedte +220mm/+230mm	900-1250 mm	950 - 1020 mm	34 kg (Voor zitbreedte 440mm)	135 kg	16,5 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°

1. + 4,2 kg voor een stoel die beschikt over zitkantelingen en een elektrische rugleuning

## Chassiskleuren

Pearl Grey



Azurite



Sand



Happy red




Electric green



## Bekleding

Black Dartex  
TR26

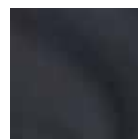

Black Plush  
TR35



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare N.V.  
Autobaan 22 - 8210 Loppem  
Belgium

