



Invacare®

Esprit Action® 4 NG

Licht, discreet en gemakkelijk
te transporteren! / *Discret,
Léger et Transportable!*

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®

De *Invacare Esprit Action4NG* is een volledig demonteerbare, elektrische rolstoel die ook zeer gemakkelijk in een manuele, lichte rolstoel met 24" wielen veranderd kan worden om transport te vergemakkelijken. De gereduceerde breedte (zitbreedte + 170 mm) zorgt ervoor dat de stoel gemakkelijk door elke deur gemanoeuvreed kan worden. De inductiemotoren zorgen voor een onnavolgbare rijkwaliteit.

Le fauteuil Invacare Esprit Action4NG est un fauteuil électrique totalement démontable sans outillage et convertible en un fauteuil manuel léger à roues 24" pour faciliter le transport. La largeur réduite (largeur d'assise + 170 mm) le rend plus étroit qu'un fauteuil roulant manuel et vous permettra de vous faufiler à travers toutes les portes. Ses moteurs à induction offrent une qualité de conduite incomparable.



Mogelijkheden voor alle leeftijden

Hij past in elke wagen en is verkrijgbaar in twaalf zitbreedtes (305 - 605 mm), en zes verschillende zitdieptes (325 tot 500 mm) om aan de noden van kind tot volwassene te voldoen. De stoel beschikt bovendien over gelaste voorvorken voor meer stevigheid.

De la version junior à la version adulte

Vous pouvez le mettre dans le coffre de n'importe quelle voiture. L'**Esprit Action**⁴ est disponible en douze largeurs d'assise (305 - 605 mm) et six profondeurs (325 - 500 mm). En outre, la chaise a des fourches avant soudées pour plus de rigidité.



**Wielbescherming /
Protection de roues**

Standaard met schokdemper. /
Anti-choc équipé de série.



**Breedteverstelbare
armsteunen / Accoudoirs
réglables en largeur**

De zitbreedte kan hierdoor 50
mm breder gemaakt worden. /
*Permet d'augmenter la largeur
d'assise du fauteuil jusqu' à + 50
mm.*



**Gereduceerde breedte van
achterwielen /
Largeur des roues arrière
réduite**

Geïntegreerde motor in frame
om stoel nog compacter te
maken. /
*Motorisation intégrée au châssis
pour rendre le fauteuil encore plus
compact.*



Technische gegevens / Données techniques

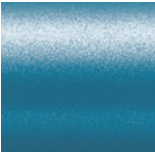
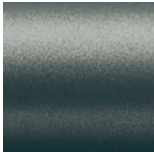
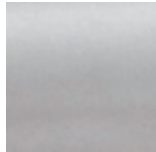
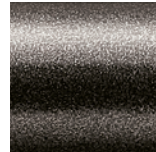

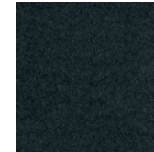
	Breedte rugleun- ing/ Largeur d'assise	Zitdiepte/ Profondeur d'assise	Zitting naar vloerhoogte/ Hauteur sol/ siège	Hoogte rugleun- ing/ Hauteur de dossier	Lengte OL/ Longueur UL	Zithelling/ Inclinaison de l'assise	Rughelling/ Inclinaison du dossier
Esprit Action⁴NG	380 - 605 mm	400 - 500 mm	460 or 485 mm	430 - 510 mm	350 - 480 mm	3°	0° - 30°
Esprit Action⁴NG Junior	305-380 mm	325-375 mm	460 mm	430 - 510 mm	220 - 415 mm	3°	0° - 30°
	Totale breedte/ Largeur hors-tout	Totale hoogte/ Hauteur hors-tout	Totale lengte/ Longueur hors-tout	Lengte zonder beensteunen/ Longueur sans repose-jambes	Gewicht/ Poids	Max. gebruikers- gewicht/ Poids max. utilisateur	Batterijcapaciteit / Batteries
Esprit Action⁴NG	+ 170 mm	897 - 1002 mm	900 - 1100 mm	640 - 840 mm	45 kg ¹	125 kg	12 Ah (17 Ah)
Esprit Action⁴NG Junior	+ 170 mm	897 - 977 mm	900 - 1100 mm	640 - 840 mm	45 kg ¹	80kg	12 Ah (17 Ah)
	Draaicircel/ Diamètre de giration	Max. beklimbaar obstakelhoogte/ Franchissement	Max. Veiligheidshelling / Pente max. sécurité	Motorcapaciteit / Puissance des moteurs	Max. rijafstand/ Autonomie	Max. rijsnelheid/ Vitesse	
Esprit Action⁴NG	1860 mm	30 mm	5° / 10%	150 W	14 km (12 Ah) 30 km (17 Ah)	6 km/h	
Esprit Action⁴NG Junior	1860 mm	30 mm	5° / 10%	150 W 5° / 10%	14 km (12 Ah) 30 km (17 Ah)	6 km/h	

1/ Het zwaarste onderdeel van de stoel / L'élément le plus lourd du fauteuil: 15 kg

2/ Kleuren enkel frame / Coloris de châssis sur simple croisillon évolutif

3/ Kleuren dubbel kruisframe / Coloris de châssis sur double croisillon

Framekleuren / Coloris de châssis

Oceaanblauw / Bleu Océan	Leisteengrijs / Gris Ardoise ²	Parelwit / Blanc Perle	Glanzend Zwart / Noir Brilliant	Roze / Rose ²	Zwart Nylon / Nylon Noir ³
					

Let op! Kleuren kunnen afwijken van de weergegeven foto / Avertissement. Les couleurs peuvent varier légèrement de celles affichées ci-dessus.

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
 Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
 Autobaan 22 - 8210 Loppem
 Belgium

INVACARE
 Yes, you can.®