

# Invacare® | SB 755



Conform de norm /  
Conformément à la  
norme  
EN 60601-2-52

## Welzijn en innovatie / *Bien-être et innovation*

Het bed *Invacare SB 755* met 4 elektrische functies biedt de gebruiker en de verzorger optimaal comfort. Dankzij het innovatieve concept (beensteun daalt tot onder inlegraam) kan de patiënt overschakelen van een ligpositie naar een complete zitpositie. Het bed heeft een geïntegreerde transportkit en innovatieve accessoires: onrusthekkens Line in aluminium, kit voor hoogteverlaging van 240 tot 700 mm en een verlenging van het inlegraam tot 200 mm. Voor patiënten tot 200 kg.

*Le lit SB 755 à 4 fonctions électriques apporte un réel confort, pour le patient et la tierce personne. Grâce à la conception innovante du relève-jambes, le patient peut passer d'une position allongée à une position dite « fauteuil ». Le lit a été conçu avec un kit de transport intégré et offre d'accessoires innovants : barrière Line en aluminium, kit de rabaissement de la hauteur de 240 à 700 mm extension de plan de couchage jusqu'à 200 mm. Pour des patients jusqu'à 200 kg.*



**Yes, you can.®**



### Uniek comfort / Un confort unique !

Het bed **Invacare SB 755** laat de patiënt toe een volledige zitpositie aan te nemen in bed: het innovatieve concept, waarbij de beensteun daalt tot onder het inlegraam, samen met een rugsteun met virtueel draaipunt, zorgt voor een erg comfortabele zitpositie, en dit zonder transfer. Bovendien verlaagt dit de druk aan de hielen, ter preventie van doorligwonden. De rugsteun met virtueel draaipunt vermijdt dat de patiënt voorwaarts glijdt tijdens de rugverstelling en vermindert zo wrijvingen.

*Le lit Invacare **SB 755** permet au patient d'être en position dite « fauteuil » dans son lit : la conception du relève-jambes électrique qui descend en dessous de l'horizontal du plan de couchage, combinée avec un relève-buste à translation, assure un confort unique, une position assise au lit sans transfert et une décharge talonnière pour la prévention des escarres. La translation sur le relève-buste minimise le glissement du patient vers le pied du lit et atténue les effets de friction.*

### Verschillende configuraties / Multiples configurations

Het bed **SB 755** heeft een origineel design in hout en aluminium en biedt tal van configuratiemogelijkheden dankzij een breed gamma bedeindes en onrusthekkens. Het bedeinde Victoria heeft een afneembare houten binnenplaat voor makkelijke voet- en hoofdverzorging. Aluminium onrusthekkens Line in kleur beuk of kers beschikbaar conform de Europese Norm IEC 60601-2-52. Geïntegreerde verlenging van 50, 100, 150 of 200 mm.

*Le lit **SB 755** a été conçu avec un design original alliant aluminium et bois et offre une large possibilité de réglages grâce aux différents panneaux et barrières. Les barrières Line en aluminium sont conformes à la norme européenne IEC 60601-2-52 et sont disponibles en coloris hêtre ou merisier. Extension du plan de couchage intégrée de 50, 100, 150 ou 200 mm.*

### Opties / Options



Rugsteun met virtueel draaipunt.

*Relève-buste à translation.*



Victoria bedeinde met afneembare binnenplaat.

*Panneau Victoria avec intérieur amovible.*



Verlagingskit, 240-700 mm.

*Kit de rabaissement de la hauteur de 240 à 700 mm.*



Optreksysteem

*Potence de lit*

**Opties / Options**



**Aluminium onrusthekken Line (4 kg)**

In beuk of kers. Conform de norm EN 60601-2-52.

**Barrière Line en aluminium (4 kg)**

En hêtre ou merisier. Conforme à la norme EN 60601-2-52.



**Zijhekkens Line telescopisch voor verlengd inlegraam**

**Barrière Line télescopique pour plan de couchage rallongé**



**Centrale rem  
Freins centralisés**



**SB 755 demonteren / démontable**



1



2



3















4



Elk onderdeel is afneembaar en weegt minder dan 25 kg. Geïntegreerde transportkit.

Chaque partie du lit est démontable et pèse moins de 25 kg. Kit de transport intégré.

**Technische gegevens / Caractéristiques techniques**


<b>SB 755</b>	 900 mm Breedte inlegr. / Largeur plan de couchage Tot. breedte / Largeur tot. 1010 mm	 2000 mm Lengte inlegr. / Longueur plan de couch. Tot. lengte / Longueur tot. 2130 mm	 350-820 mm Hoogte inlegr. / Hauteur plan de couch. Tot. hoogte / Hauteur tot. 1600-2070 mm	 800 - 260 - 260 - 680 mm	 Bodemvrijheid / Garde au sol 170 mm	 Rughoekverstelling / Angle du Relève- buste : 0° - 73°
<b>SB 755</b>	 Hoek knieplooiing / Angle plicature genoux : 0° - 28°	 Min. hoek / Angle min. 0° - 16°	 Max. hoek / Angle max. 0° - 18°	 25° boven / au dessus 14° onder / en dessous	 Max. gebruikersgewicht / Poids patient max : 200 kg SWL : 235 kg	 Elk deel van inlegraam weegt minder dan 25 kg / Chaque partie du plan de couchage pèse moins de 25 kg

Het bed mag niet gebruikt worden door personen jonger dan 12 jaar of personen van wie de lichaamsbouw overeenkomt met die van een 12-jarige of kleiner.  
*Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente à ou plus petite celle d'une personne de moins de 12 ans.*

**Kleur / Coloris**



Aluminium

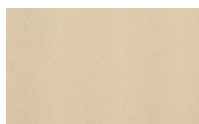

Beuk / Hêtre



Kers / Merisier

Invacare N.V.  
Autobaan 22 . 8210 Loppem  
Belgium  
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10  
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11  
Email : [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

© 2014 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.  
*Tous droits réservés.*

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  
*Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.*

SB 755 - BE - 05/2014