

Invacare® Matrix® Flo-tech® **Zitzkissen / Coussins d'assise**



 **matrix**
SEATING SERIES


INVACARE
Yes, you can.®

*"Less back and more support.
I can sit longer and play harder. I love it!"*

Allen McKinley



Invacare® | **Matrix® Flo-tech®****Zitzkussens /
Coussins d'assise**

<i>Invacare Matrix Flo-tech Lite Visco</i>	4
<i>Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco</i>	6
<i>Invacare Matrix Flo-tech Image</i>	8
<i>Invacare Matrix Flo-tech Solution Xtra</i>	10

Invacare® | **Matrix® Flo-tech® Lite Visco**



Origineel concept! / Conception originale!

Het **Matrix Flo-tech Lite Visco** zitkussen is samengesteld uit een basisfoam met een densiteit van 40 kg/m^3 en een viscoelastische mousselaag van 80 kg/m^3 met vormgeheugen. De basis in mousse voorkomt het risico op spoorvorming, zowel bij zwaarlijvige als bij hele magere mensen. De viscoelastische mousse zorgt voor een goede ondersteuning van de lichaamsdelen die in contact zijn met de zitsteun en vermindert zo de drukpunten. / Le coussin **Matrix Flo-tech Lite Visco** est composé d'une base en mousse Haute Résilience de 40 kg/m^3 recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m^3 . La base en mousse Haute Résilience va prévenir des risques de talonnement, soit chez des patients obèses soit chez des patients très maigres ayant des saillies osseuses importantes. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une réduction des pressions de contact.



Yes, you can.



Vele inkepingen voor meer comfort!

De bekleding van het **Matrix Flo-tech Lite Visco** zitzakken is uitgerust met inkepingen om het eventuele hangmateffect tegen te gaan, net zoals de inkepingen ter hoogte van het frame de zittiepte moeten optimaliseren. Een gebogen gietvorm zorgt voor een goede zithouding met abductieklos en zijdelingse steun. Het **Lite Visco** zitzakken is vormvast verkrijgbaar voor een maximaal gebruikersgewicht tot 100 kg om spoorvorming te vermijden.

De multiples découpes pour toujours plus de confort!

Le coussin **Matrix Flo-tech Lite Visco** est équipé d'une découpe toile d'assise pour compenser l'effet Hamac éventuel d'une toile ainsi qu'une découpe au niveau des tubes de dossier pour maximiser la profondeur d'assise du fauteuil. Un galbe assure un bon positionnement du patient avec plot d'abduction et un soutien latéral. Le coussin **Lite Visco** est disponible en portance ferme pour un poids patient maximum de 100 kg afin de prévenir les risques de talonnement.

Kenmerken / Caractéristiques



Waterdichte en waterafstotende zitbekleding / Revêtement imperméable et déperlant

Uitgerust met bevestigingsgordel / Equipé d'une sangle de préhension.

Foambasis met hoge densiteit van 40 kg/m³, bedekt met visco-elastische mousse van 80 kg/m³ met vormgeheugen. /

Base en mousse haute résilience de 40 kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³.

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



**Matrix
Flo-tech Lite
Visco**

Breedte / Largeur : Diepte / Profondeur :
380 mm 405 mm
405 mm 430 mm
430 mm 455 mm
455 mm

55 mm

Vanaf / A partir de
1.26 kg

Max. 100 kg

Wasmachine /
Lavage machine
80°

Kleur bekleding / Coloris du revêtement



Zwart / Noir

Invacare® | **Matrix® Flo-tech®**
Contour Visco



Origineel concept! / Conception originale!

Het **Matrix Flo-tech Contour Visco** zitkussen is samengesteld uit een basisfoam met een densiteit van 40 kg/m^3 en een viscoelastische mousselaag van 80 kg/m^3 met vormgeheugen. De basis in mousse voorkomt het risico op spoorvorming, zowel bij zwaarlijvige als bij heel magere mensen. De viscoelastische mousse zorgt voor een goede ondersteuning van de lichaamsdelen die in contact zijn met de zitsteun en vermindert zo de drukpunten. /

*Le coussin **Matrix Flo-tech Contour Visco** est composé d'une base en mousse Haute Résilience de 40 kg/m^3 recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m^3 . La base en mousse Haute Résilience va prévenir des risques de talonnage, soit chez des patients obèses soit chez des patients très maigres ayant des saillies osseuses importantes. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une réduction des pressions de contact.*



Yes, you can.®



Vele inkepingen voor meer comfort! /

De kussens van de **Matrix Flo-tech Contour Visco** zijn verkrijgbaar in 2 verschillende maten: **Contour Visco** en **Contour Visco** voor comfortzetels. Het **Contour Visco** kussen is uitgerust met inkepingen in de bekleding om het eventuele hangmateffect tegen te gaan, net zoals de inkepingen ter hoogte van de rugbuizen de zitdiepte moeten optimaliseren. De juiste zithouding wordt verzekerd door een gebogen gietvorm met abductieklos en zijdelingse steun.

De multiples découpes

Les coussins **Matrix Flo-tech Contour Visco** sont disponibles en 2 formes différentes: **Contour Visco** et **Contour Visco** pour fauteuils de confort. Le coussin **Contour Visco** est équipé de quelques découpes pour compenser l'effet Hamac éventuel de la toile, ainsi qu'une découpe au niveau des tubes de dossier pour maximiser la profondeur d'assise. Un galbe assure un bon positionnement du patient avec plot d'abduction et un soutien latéral.

Kenmerken / Caractéristiques



Waterdichte en waterafstotende zitbekleding / Revêtement imperméable et déperlant

Uitgerust met bevestigingsgordel. / Equipé d'une sangle de préhension.

Specifiek model voor comfortstoelen Rea® Azalea® en Clematis® / Modèle spécifique pour fauteuil de confort Rea® Azalea® et Clematis®

Verkrijbaar in 4 maten, diepte 530 mm, stevige basis. / 4 tailles disponibles, profondeur 530 mm, portance ferme.

Twee foAMDensiteiten / Deux densités de mousse

Vast (max. gebruikersgewicht 100 kg) en heel vast (max. gebruikersgewicht 125 kg). / Ferme (poids patient max 100 kg) et très ferme (poids patient max 125 kg).

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Matrix Flo-tech Contour Visco

Breedte / Largeur : Diepte / Profondeur :
355 mm 405 mm
405 mm 430 mm
430 mm 455 mm
455 mm 530 mm
480 mm 560 mm
505 mm
600 mm

90 mm

Vanaf / A partir de
1,60 kg

Max. 125 kg

Wasmachine /
Lavage machine
80°

Kleur bekleding / Coloris du revêtement



Zwart / Noir

Invacare® | **Matrx® Flo-tech® Image**



Stabiliteit en preventie! / Stabilité et prévention !

Het **Matrx Flo-tech Image** kussen bestaat uit een visco gelzakje bovenop een dichte foambasis van 70 kg/m^3 . Het ontwerp van de foambasis is voorgevormd om een goede positie van de dijen en een stabiele zithouding te garanderen. Het verzonken heupgedeelte wordt opgevuld met een gelzak en biedt zo een grotere en betere contactzone. Voor gebruikers met een hoog decubitusrisico. /

*Le coussin **Matrx Flo-tech Image** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m^3 . Le design de la base en mousse est galbé pour favoriser le bon alignement des cuisses et assurer un positionnement stable. La cuvette ischiatique avec une poche en gel fluide apportera une zone de contact plus importante au niveau de la zone sacrée et donc une réelle prévention des escarres.*



Yes, you can.



Origineel Concept

Het design van dit kussen is ontworpen voor een betere aanpassing van het kussen aan de stoel: inkepingen in de zitbekleding en ter hoogte van het frame aan de rugzijde compenseren het hangmateffect en maximaliseren de diepte van de stoel.

Conception Originale

Le design du coussin **Image** a été pensé pour une meilleure adaptation du coussin sur le fauteuil roulant : découpe toile d'assise pour compenser l'effet hamac de la toile d'assise, découpe tube de dossier pour maximiser la profondeur du fauteuil.

Kenmerken / Caractéristiques



Waterdichte en waterafstotende zitbekleding / Revêtement imperméable et déperlant


Uitgerust met bevestigingsgordel. / Equipé d'une sangle de préhension.

Zakje met vloeibare gel / Poche en gel fluide

Laat een betere verdeling van de drukpunten toe. Zak met compartimenten om de stabiliteit van het bekken te behouden. / Permet une meilleure répartition des points de pression. Poche compartimentée pour conserver la stabilité du bassin.

Antibacteriële Ultra Fresh™ behandeling / Traitement antibactérien Ultra Fresh™

Beperkt de toename van bacteriën en maakt de foam meer bestand tegen geuren en schimmels. / Limite la prolifération des bactéries et rend la mousse plus résistante aux odeurs et moisissures.

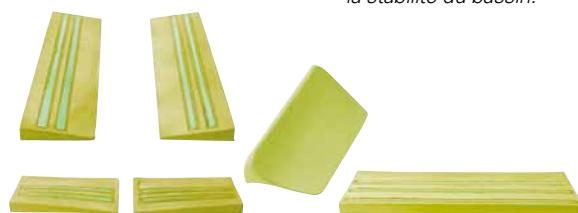

Positioneringskussens / Cales de positionnement

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



**Matrix
Flo-tech
Image**



Breedte / Largeur : Diepte / Profondeur :
405 mm 405 mm
430 mm 430 mm
455 mm 455 mm
480 mm
500 mm



60 mm



Vanaf / A partir de
1.82 kg




Max. 140 kg



Wasmachine / Lavage machine
80°

Kleur bekleding / Coloris du revêtement

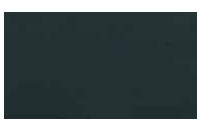

Zwart / Noir

Invacare® | **Matrx® Flo-tech®**
Solution Xtra



Het **Solution Xtra** kussen bestaat uit een visco gelzakje bovenop een foambasis van 70 kg/m^3 dichtheid. De gelzak is onderverdeeld in verschillende compartimenten om spoorvorming te voorkomen. De vloeibare gel garandeert een stabiele zithouding en voorkomt decubitus in sterke mate. De **Ultra Fresh™** behandeling is ook op het **Matrx Flo-tech Solution Xtra** kussen van toepassing. Deze behandeling beperkt de toename van bacteriën en maakt het kussen beter bestand tegen geuren en schimmels. /

Le coussin **Solution Xtra** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m^3 . La nappe de gel prévient les risques de talonnement et assurer un maximum de prévention par immersion dans le gel. Le gel fluide permet d'assurer un positionnement stable tout en assurant une prévention d'escarres pour risque élevé. Le traitement anti-bactérien **Ultra Fresh™** est désormais appliqué au coussin **Matrx Flo-tech Solution Xtra**. Ce traitement limite la prolifération des bactéries et rend ainsi la mousse encore plus résistante aux odeurs et aux moisissures.



Yes, you can.®



Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Matrix Flo-tech
Solution Xtra

Breedte /
Largeur:
360 - 600 mm



Diepte /
Profondeur:
330 - 550 mm



Hoogte /
Hauteur:
60 mm



Gewicht / Poids
Vanaf / A partir de
3,08 kg



Max
gebruikersgewicht /
Poids max
140 kg



Wasmachine /
Lavage machine
80°

Technische gegevens / Caractéristiques Techniques

Breedte /
LargeurDiepte /
ProfondeurHoogte /
HauteurGewicht /
PoidsMax. gebruikers-
gewicht /
Poids Max. Utilisateur*Bekleding wasbaar op /
Revêtement
lavable à**Matrix Flo-tech Lite Visco**

380 - 455 mm

55 mm

1,26 kg

100 kg

80°

Matrix Flo-tech Image

355 - 600 mm

90 mm

1,60 kg

125 kg

80°

Matrix Flo-tech Contour Visco

405 - 500 mm

60 mm

1,82 kg

140 kg

80°

Matrix Flo-tech Solution Xtra

360 - 600 mm

60 mm

3,08 kg

140 kg

80°

* Het maximale gebruikersgewicht wordt vastgelegd in de veronderstelling dat het gekozen kussen een adequate diepte en lengte heeft, aangepast aan het gebruik. /

* Les limites maximales de poids sont fixées en supposant que le coussin choisi ait une largeur et une profondeur appropriées à l'utilisation prévue

Geproduceerd volgens de Europese Normen / Fabriqués selon les Normes Européennes:
BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, and BS 7176 (Crib 5)

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. *Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.*

Matrix Flo-tech - BE - 04/2013



Yes, you can.®