


Softform[®] Premier

Drukverlagende statische matras

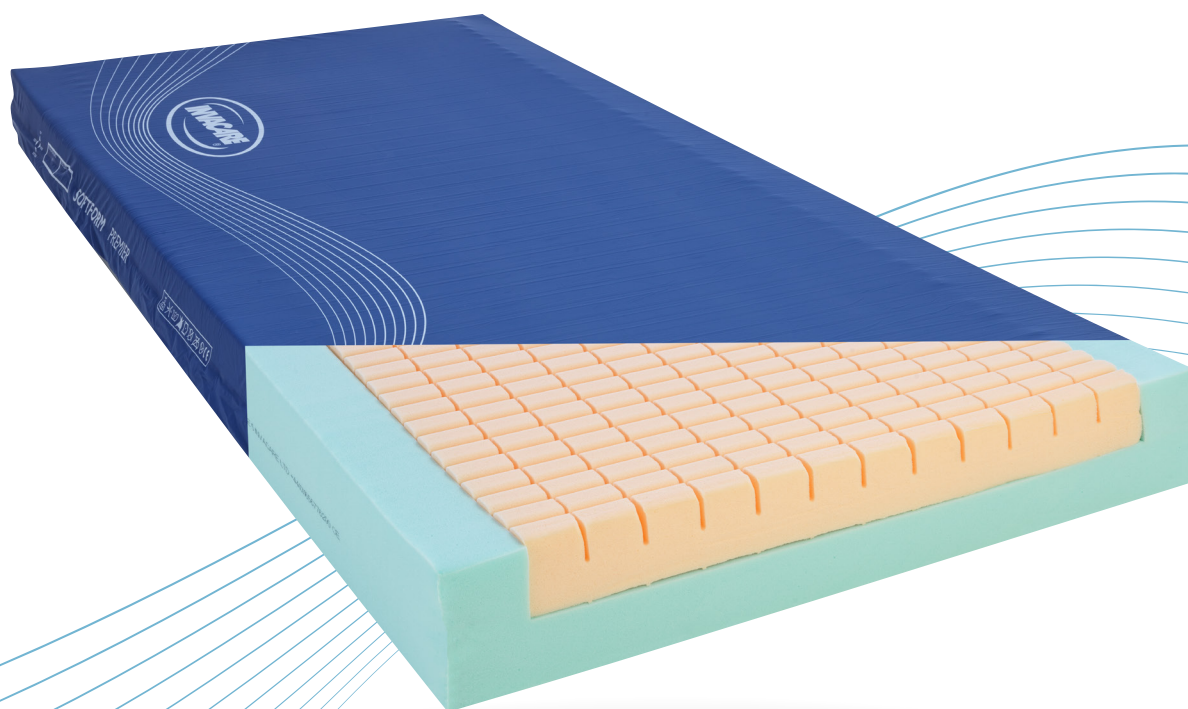

Yes, you can.[®]


Effectieve preventie van doorligwonden

De Invacare Softform Premier is een anti-decubitus matras die speciaal ontworpen is om aan de dagelijkse behoeftes te beantwoorden. Deze matras is praktisch, duurzaam en biedt een uitzonderlijk niveau van comfort en drukverlaging.

De Invacare Softform Premier heeft een unieke, diep geprofileerde bovenlaag die comfort en drukverlaging biedt.

De hoes is gemaakt uit waterdicht elastisch polyurethaan en helpt schuif- en wrijvingskrachten te voorkomen.

De matrashoezen zijn voorzien van lasnaden. Een flap over de rits voorkomt toetreding van bacteriën in de matras. Deze eigenschappen zorgen samen voor een effectieve vermindering van de kans op het binnendringen van vloeistof. De geharde PU-gecoate basis helpt ook om de levensduur van de matras te verlengen.

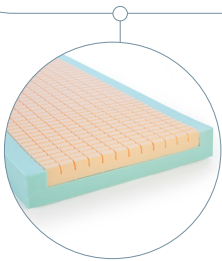

U-vormige moussebasis

- › Zorgt voor een efficiënte laterale steun.




Beschermflap over de rits

- › Beschermt de rits en voorkomt dat vloeistoffen in de matras komen, wat bijdraagt aan infectiebeheersing.



Oriëntatie symbool

- › Het oriëntatie symbool zorgt ervoor dat de matras correct in het bed ligt.

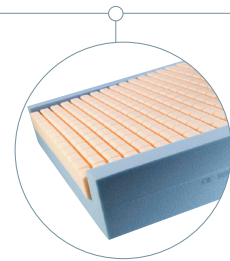

Hellend vlak aan de hielzone

- › De bovenlaag van de matras heeft een aflopend voeteneinde wat resulteert in minimale druk op de hielen.

Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.



Breedte ▼



Hoogte ▼



Lengte ▼



Productgewicht ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Max. reinigingstemperatuur hoes ▼



Baltisch Blauw

Kleur

Single size:
660 - 900 mm
Double size:
910 - 1370 mm
King size:
1380 - 1525 mm

152 mm

1410 - 2100 mm

13 kg

247.6 kg

95 °C

Geproduceerd volgens Europese Normen:
BS EN 597-1 Cig,
BS EN 597-2 Match.
Schuim binnenkant:
BS 5852: 1990 Crib Source 5; Hoes BS7175:
1989 Crib Source 5.

1. Professionele zorg is essentieel bij het voorkomen van decubitus. Deze matras draagt op positieve wijze bij aan een zorgplan ter voorkoming van decubitus. Scholing, klinische beoordeling en actie-gebaseerde planning op basis van kwetsbaarheid zijn fundamentele factoren als het gaat om decubituspreventie. Een reeks beoordelingschalen kan gebruikt worden als formele methode van risicobepaling en zou ingezet moeten worden tezamen met informele beoordeling (die van de zorgverlener).

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Email: marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.