


# Softform<sup>®</sup> Premier Visco

Drukverlagende visco-elastische matras

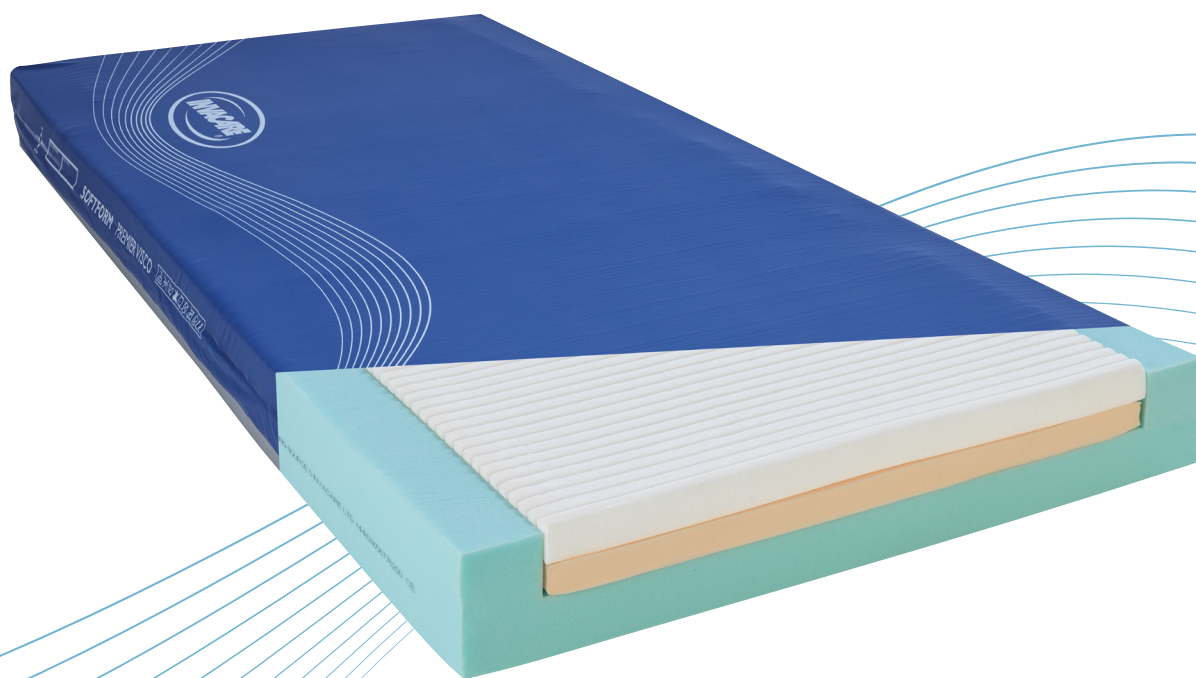

Yes, you can.<sup>®</sup>

# Effectieve preventie van doorligwonden

De Invacare Softform Premier Visco is een drukverdelende matras met een diep visco-elastische binnenlaag, dat een hoge dichtheid heeft en temperatuurgevoelig is voor het lichaam, waardoor het zich aanpast aan de lichaamsvorm van de cliënt. Dit biedt uitzonderlijk comfort en vergemakkelijkt drukvermindering door piekdrukken te minimaliseren.

De temperatuurgevoelige visco-laag past zich via opwarming volledig aan de lichaamsvorm aan. Dit


maximaliseert het contactoppervlak om zo de druk te verminderen en het comfort te verhogen. De hoës is een 2-zijdig rekbaar polyurethaanhoës met hoogfrequent gelaste naden en een flap over de volledige lengte die de ritssluiting verbergt.

Het hoogwaardige visco-elastische schuim in deze matras zorgt voor een uitzonderlijk comfortabel steunoppervlak.



## De hoës is bestand tegen het binnendringen van vloeistof

- › 2-zijdige rekbare en **waterdichte polyurethaanhoës** met hoogfrequent gelaste naden en een flap over de volledige lengte die de ritssluiting verbergt.
- › Heeft ook een geharde PU-gecoate basis om de levensduur van de matras te verlengen.

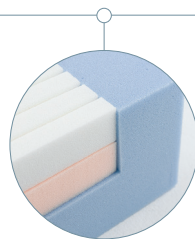

## Modulaire constructie

- › Maakt **eenvoudige vervanging** van alle onderdelen mogelijk.
- › Helpt de levensduur van het product te verlengen.



## Oriëntatie symbool

- › Het oriëntatie symbool zorgt ervoor dat de **matras correct in het bed ligt**.

## Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op [www.invacare.be](http://www.invacare.be).



Breedte ▼



Hoogte ▼



Lengte ▼



Productgewicht ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Max. reinigingstemperatuur hoës ▼

Baltisch Blauw

Kleur

Single size:  
660 - 900 mm  
Double size:  
910 - 1370 mm  
King size:  
1380 - 1525 mm

152 mm

1410 - 2080 mm

13 kg

247,6 kg

95 °C

Geproduceerd volgens Europese Normen:  
BS EN 597-1 Cig,  
BS EN 597-2 Match.  
Schuim binnenkant:  
BS 5852: 1990 Crib Source 5; Hoës BS7175:  
1989 Crib Source 5.

1. Professionele zorg is essentieel bij het voorkomen van decubitus. Deze matras draagt op positieve wijze bij aan een zorgplan ter voorkoming van decubitus. Scholing, klinische beoordeling en actiegebaseerde planning op basis van kwetsbaarheid zijn fundamentele factoren als het gaat om decubituspreventie. Een reeks beoordelingsschalen kan gebruikt worden als formele methode van risicobepaling en zou ingezet moeten worden tezamen met informele beoordeling (die van de zorgverlener).

Tel.: **+32 (0)50 - 83 10 10**  
Email: [marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare N.V.  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
België



Yes, you can.