



Invacare® | **Bora® Plus**

Optimale bewegingsvrijheid

LINX®





De **Invacare Bora Plus** is een compacte, stijlvolle stoel die past bij elke levensstijl. Deze opvallende stoel heeft een krachtige, maar vlotte rijervaring met verbeterde kleuropties voor een unieke stijl.

Belangrijke eigenschappen zijn:

- Ruime keuze uit beschikbare kleuren
- Geavanceerd veringsysteem
- Compact design
- LiNX Smart Technologie



### Ruime keuze uit kleuren

De **Bora Plus** is ontworpen opdat gebruikers hun stoel kunnen personaliseren volgens hun smaak. U kunt kiezen uit 7 bekappingskleuren, 2 framekleuren en 3 velgkleuren. Elk kleur past perfect bij de zwarte luchtbanden en bij de voorvorken.

### Geavanceerd veringsysteem

De **Bora Plus** beschikt over een geavanceerd veringsysteem en biedt daarmee een zeer comfortabele rijervaring. Ook bij gebruik buitenshuis. De stoel is leverbaar in twee snelheidsuitvoeringen, namelijk voor snelheden tot 6 of 10 km/u. Daarbij garandeert de verbeterde 50Ah batterij een betrouwbare rit.

### Compact design

Door de compacte afmetingen is de **Bora Plus** ook uitermate geschikt voor gebruik binnenshuis. Als er gekozen wordt voor een kleiner formaat voorwielen, kan de breedte van de rolstoel zelfs minder dan 59 cm zijn.

## LiNX Smart Technology: Redefining Mobility

Invacare **LiNX** is ons besturingssysteem dat beschikt over een zelflerende functie dankzij geavanceerde technologie en zorgt voor een revolutionaire rijervaring. Het biedt adviseurs de mogelijkheid om elektrische rolstoelen sneller en gemakkelijker te configureren en af te stemmen.

De **LiNX** Smart Technologie krijgt programmeer- en onderhoudupdates die draadloos en real-time kunnen worden uitgevoerd. Met eenvoudige toegang tot statistische en diagnostische informatie biedt **LiNX** volledig inzicht voor adviseurs.



### Touchscreen technologie

De afstandsbediening REM400 heeft een indrukwekkend **3,5" kleuren touchscreen** dat **minimale werking** vereist.

Nu de moderne technologie zijn weg heeft gevonden naar de markt van elektrische rolstoelen, kan deze innovatieve en interactieve bediening worden geconfigureerd op basis van de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de gebruiker.



### Extra bedieningen

Voor degene die de standaard bediening niet kan gebruiken, biedt **LiNX** een selectie van andere bedieningen. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid van de gebruiker vergroot. Dit omvat een compacte bediening, een compacte bediening met minimale werking, een kinbesturing en dubbele besturingsopties.

## Kenmerken en opties

### USB-lader

2 x USB 2.0 ports leveren tot 1A per stuk om apparaten opgeladen te houden. Ophangstrip maakt eenvoudige bereikbaarheid mogelijk.



### LiNX G-Trac® technologie

Voor complexere besturingsbehoeften zorgt **LiNX** voor een verbeterde functionaliteit en besturing terwijl **G-Trac®** (optioneel) dit versterkt en ervoor zorgt dat de stoel de rijrichting aanhoudt zoals de besturing dat aangeeft.

## Bluetooth®

### Ingebouwde Bluetooth

De REM400-bediening geeft gebruikers de mogelijkheid om met 3 apparaten tegelijkertijd verbonden te zijn en kan gekoppeld worden aan een computermuis.




### Framekleuren



### Accentkleuren



### Kleuren velg

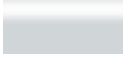

### Diverse kleuren

Personaliseer uw stoel dankzij 7 bekappingskleuren, 2 framekleuren en 3 velgkleuren.

### Zwarte bekleding

Uitgedost met luchtbanden of volle zwarte banden en zwarte voorvorken voor een moderne look.



### Verschillende voorwielen

Keuze uit twee verschillende voorwielmaten afhankelijk van de gebruikersbehoeftes.



### Zitlift

De **Bora Plus** is beschikbaar met een zitlift van 300 mm inclusief een elektrische kanteling tot 30°. Lagere onderbeenlengtes zijn mogelijk in combinatie met ons **Modulite** zitsysteem.

### Eendelige zitplaat

Geïntegreerd systeem voor de montage van arm- en beensteunen met spanningsverstelbare rug.



### Demonteerbare zitunit

Trek aan de riem, kantel de zitting en maak de besturingskabel los om de zitting te verwijderen. Makkelijker kan niet!



### Ophanging

Rijcomfort en wegcontact zijn ook bij hoge snelheid gewaarborgd.



### Telescopisch zitframe

De Flex3 rugleuningplaten passen over een breedte van 380 tot 530 mm.

## Technische gegevens

Voor meer informatie, raadpleeg onze website op [www.invacare.be](http://www.invacare.be).

	Breedte rugleuning	Zitdiepte	Zitting naar vloerhoogte	Hoogte rugleuning	Hoogte armleuningen	Lengte beensteunen	Zithelling
<b>Eendelige zitplaat</b>	440 - 480 mm <sup>1</sup>	410 - 510 mm	450 mm <sup>3</sup>	480 mm	275 - 340/ 325 - 390 mm	290 - 470 mm <sup>3,4</sup>	0 - 20°
<b>Modulite™ telescopisch zitframe</b>	380 - 530 mm <sup>2</sup>	410 - 510 mm	450 mm <sup>3</sup> / 450 - 750 mm <sup>3,10</sup>	480, 540, 560 mm <sup>3,11</sup>	245 - 310/ 295 - 360 mm	290 - 470 mm <sup>3,4</sup>	0 - 20° / 0 - 30° <sup>10</sup>
	Rughelling	Totale breedte	Totale hoogte	Totale lengte (incl. beensteunen)	Lengte zonder beensteunen	Totaal gewicht	Max. gebruikersgewicht
<b>Eendelige zitplaat</b>	90° - 120°	590 / 620 mm <sup>5</sup>	930 mm	1160 mm <sup>6</sup> 1210 mm <sup>10</sup>	820 / 840 mm <sup>5</sup>	98 kg <sup>9</sup>	130 kg
<b>Modulite™ telescopisch zitframe</b>	90° - 120°	590 / 620 mm <sup>5</sup>	970 mm	1160 mm <sup>6</sup> 1210 mm <sup>10</sup>	820 / 840 mm <sup>5</sup>	94 kg <sup>9</sup>	130 kg
	Batterijcapaciteit	Draaicirkel	Max. beklimbaar obstakelhoogte	Max. veiligheidshelling	Motorcapaciteit	Max. rijafstand	Max. rijnsnelheid
	ca. 50 Ah	1600 mm 1630 mm <sup>10</sup>	60 mm <sup>7</sup>	18% (10°)	2 x 230 W	tot 30 km <sup>8</sup>	6 / 10 km/u



**matrix**  
SEATING SERIES

Invacare® Modulite™



- Zitkussen 430 mm
- Extra 50 mm door aanpassing armsteunen
- Gemeten zonder zitkussen / zitbekleding
- Bepaalde beensteunlengtes zijn alleen mogelijk in combinatie met bepaalde typen beensteunen
- Afhankelijk van het formaat zwenkwielen
- Inclusief standaard beensteunen
- 100 mm met stoepbeklimmer
- Conform ISO 7176-4:2008
- Totale gewicht is afhankelijk van de uitvoering
- Met zitlift of 30° kantelverstelling
- Afhankelijk van keuze rugondersteuning
- Invacare **Modulite** zitcomponenten zijn kruislings aanpasbaar met alle elektrische rolstoelen van Invacare en gedeeltelijk met de stoelijn van Invacare Rea.

Het woord, het merk en het LINX-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Dynamic Controls en worden onder licentie gebruikt door Invacare.

## Accentkleuren

Pearl Night Blue    Metallic Silver    Black    Transparent Cherry Red    Arctic White    Grasshopper Green    Sunshine Yellow



Raadpleeg Invacare Unique om jouw **Bora Plus** te personaliseren.

## Framekleuren

Black    Arctic White



## Kleuren velg

White    Silver    Black



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare N.V.  
Autobaan 22 - 8210 Loppem  
Belgium

Trusted Solutions,  
Passionate People

