

# ISA™

## Invacare Stand Assist



**Verbeterd design voor comfortabele transfers**

Onderbeen ondersteuning | Uitschuifbare hefarm | Ergonomische handgrepen



Yes, you can.

# Een evolutie in actieve tilliften

Onze nieuwe veelzijdige actieve tillift werd ontworpen voor cliënten die hulp nodig hebben bij een transfer, maar die wel nog hun eigen gewicht kunnen dragen.

De nieuwe **Invacare** actieve tillift biedt veiligheid, comfort en een aangenamere ervaring voor cliënten. **ISA** is speciaal ontworpen voor onafhankelijke individuen die wat meer ondersteuning nodig hebben.

Als zorgverlener staat gebruiksgemak centraal. Daarom heeft de **ISA** een gebogen onderstel en is hij lichter in gewicht. In veel gevallen is de zorgverlener een familielid en net daarom is gebruiksgemak van essentieel belang.

Deze actieve tillift kan zonder gereedschap gedemonteerd worden. Bijgevolg maakt dit de **ISA** eenvoudig voor transport.



## Ontworpen om de beste tilervaring te bieden voor de cliënt en de zorgverlener

De **ISA** beschikt over veel opties en accessoires om de tillift aan te passen aan de lichaamsvorm en grootte.

### Ontwerpverbeteringen voor de cliënten

- ▶ **Ergonomische handgrepen:** speciaal ontworpen ontwerp dat zich aanpast aan de natuurlijke vorm van de hand en de positie van de pols.
- ▶ **Uitschuifbare hefarm:** lengteinstelbaar naargelang de grootte van verschillende cliënten.
- ▶ **Onderbeen ondersteuning:** hoogteinstelbaar naargelang de onderbeenlengte van de cliënt.
- ▶ **Voetplaat:** diverse modellen naargelang de voetmaat van de cliënt (tot schoenmaat 48).

### Ontwerpverbeteringen voor de zorgverleners

- ▶ **Duwhandvat:** vorm en afmeting op basis van de gemiddelde ellebooghoogte en schouderbreedte van de zorgverlener, om soepelheid en gemak tijdens het manoeuvreren te garanderen.
- ▶ **Voetpedaal:** anti-slip en groot oppervlak voor elke type schoen, optioneel met een hendel voor eenvoudige, manuele spreiding van de basis (voor de ISA<sup>COMPACT</sup> en ISA<sup>STANDAARD</sup>).

**NIEUW**

## UITZONDERLIJKE KENMERKEN & OPTIES

### Uitschuifbare hefarm

- ▶ De **TelescoLift** kan worden ingesteld op negen verschillende lengtes naargelang de grootte van de cliënt voor maximale flexibiliteit.

### Ergonomische handgrepen

- ▶ Het uniek design past zich perfect aan de natuurlijke vorm van de hand voor een veilige grip.

### Onderbeen ondersteuning

- ▶ De onderbeen ondersteuning is in zes hoogtes verstelbaar voor optimaal comfort.

### Bijkomende kenmerken

- ▶ **Afneembare voetplaat:** beschikbaar in drie hoogtes, afneembaar. Gebogen vorm om dichter bij het toilet te komen.
- ▶ **Duwhandvat en voetpedaal:** ergonomische vorm voor eenvoudige bediening.
- ▶ **Liftmat haken:** flexibele en veilige haken voor een snelle en eenvoudige bevestiging.
- ▶ **Kuitband:** gevoerd voor extra comfort. Gemakkelijk verwisselbaar en wasbaar.

### Demonteerbare mast

- ▶ Vereenvoudigde transport dankzij de gemakkelijk demonteerbare mast.

### Gebogen poten

- ▶ Ergonomisch gevormd om eenvoudig te manoeuvreren rondom stoelen of toiletten.



## De 3 belangrijkste kenmerken en voordelen



### ◀ Ergonomische handgrepen positioneert de handen op een natuurlijke, comfortabele en intuïtieve manier

- Speciale vorm met een gebogen hoek voor een natuurlijke houding van de hand.
- Aangepaste breedte volgens de gemiddelde schouderdimensie voor minimale lichaamsspanning.
- Soft Touch materiaal voor meer comfort gedurende de transfer.



### ◀ Uitschuifbare hefarm TelescoLift PATENT de tillift afstemmen op de hoogte, conditie en voorkeur van de patiënt

- Eén flexibele hefarm met negen verschillende posities om diverse cliënten te kunnen transfereren.
- Gemakkelijk toegankelijke hendel met een zelfremmend mechanisme voor een snelle en veilige transfer.



### ◀ Onderbeen ondersteuning PATENT de onderbenen ondersteunen met maximaal comfort

- Eenvoudige één-hand hoogte verstelling met zes posities, zonder gereedschap.
- Soepele schuimkussens in PU die gemakkelijk vervangen kunnen worden, indien nodig.

# Ontdek de **ISA** Family

## Een veelzijdige reeks aan actieve tilliften

De ISA heeft drie basismodellen met verschillende gebruikersgewichten, afmetingen en accessoires van basis tot een meer geavanceerde tillift, voor zowel gebruik in een thuisituatie als in een zorginstelling.



### ISA COMPACT

Perfect voor een omgeving met een beperkte ruimte.

### ISA STANDARD

Talrijke opties voor een hogere flexibiliteit.

### ISA XPLUS

Superieure zorg voor de plus-size cliënten.

#### Max. gebruikersgewicht

140kg

160kg

200kg

#### Gebruikerslengte

1400-1800mm

1500-1900mm

1400-2000mm

Een reeks configuraties is beschikbaar om tegemoet te komen aan de behoeften van uw verzorger en patiënt, zoals de mechanische of de elektrische poten, een vaste of zwenkbare onderbeen ondersteuning, verschillende voetplaathoogtes en diverse elektrische opties.

## Beschikbare accessoires:

- ▶ Twee stand-assist liftmatten met een 2-punts bevestiging of met een 4-punts bevestiging en onderbeensteun in alle maten
- ▶ Een kuitband voor meer stabiliteit
- ▶ Beschermende hoezen voor benen
- ▶ Hendel voor manuele spreiding van de poten
- ▶ Electronica: extra batterij, muur-lader (voor de ISA<sup>STANDAARD</sup> en ISA<sup>XPLUS</sup>).



# Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Alle afmetingen zijn genomen met 100 mm wielen, tussenvoetplaat en een persoon van 80 kg.  
Voor 75 mm wielen (COMPACT), stel de hoogtematen in op 15 mm minder.  
Alle metingen zijn uitgevoerd met een tolerantie van +3%.




Max. gebruikersgewicht ▼



Lengte basis ▼



Breedte basis ▼

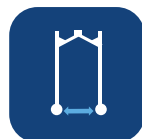

Binnenbreedte (benen gesloten) ▼



Binnenbreedte (benen open) ▼



Draaicirkel ▼

	Max. gebruikersgewicht ▼	Lengte basis ▼	Breedte basis ▼	Binnenbreedte (benen gesloten) ▼	Binnenbreedte (benen open) ▼	Draaicirkel ▼
<b>ISA<sup>COMPACT</sup></b>	140 kg	925 mm	535 mm	405 mm	735 mm	1060 mm
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	200 kg	1280 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1430 mm



Totaalgewicht ▼



Max. hoogte (met verkorte/verlengde hefarm) ▼



Hefbreik (met verkorte/verlengde hefarm) ▼




Bodemvrijheid ▼



Hoogte van de poten\* ▼



Hefsnelheid ▼

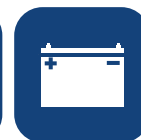

Aantal cycli\*\* ▼

	Totaalgewicht ▼	Max. hoogte (met verkorte/verlengde hefarm) ▼	Hefbreik (met verkorte/verlengde hefarm) ▼	Bodemvrijheid ▼	Hoogte van de poten* ▼	Hefsnelheid ▼	Aantal cycli** ▼
<b>ISA<sup>COMPACT</sup></b>	43 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	52 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82

\* Met beschermhoezen van 5 mm  
\*\* Met batterijlading tussen 100% en 50%

## Framekleur ▼



**Lichtgrijs:**  
mast, juk en hefarm  
RAL: 7035



**Anthracite grijs:**  
Basis, poten en duwhandvat  
RAL: 7016

Kleuren kunnen iets afwijken van het hierboven weergegeven.

## Regelgeving ▼



**Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10**  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare NV  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
België

