



Invacare® | **Storm<sup>®4</sup>**

Stijlvolle en flexibele mobiliteit  
voor veeleisende gebruikers

**LINX**





De *Invacare Storm<sup>4</sup>* elektrische rolstoel is speciaal bedoeld voor gebruikers die hoge eisen stellen aan hun stoel wat betreft **flexibiliteit, aanpassingsvermogen en functionaliteit**.

De *Storm<sup>4</sup>* geeft zowel binnens- als buitenshuis een indrukwekkende prestatie en biedt een veilige en stabiele rijervaring zonder in te boeten op wendbaarheid. Dankzij het modern design ziet de elektrische rolstoel er ook altijd elegant en stijlvol uit. Belangrijke eigenschappen zijn:

- **Makkelijk configureerbaar**
- **Gebruiksgemak**
- **Stijlvol design**
- **LiNX Smart Technologie**



### Makkelijk configureerbaar

Dankzij het **modulair ontwerp** is de *Invacare Storm<sup>4</sup>* eenvoudig aan te passen aan verschillende gebruikersbehoeften:

- Het type motor en de rijsnelheid kan worden geselecteerd op basis van gebruik binnens- of buitenshuis
- Het **Modulite™ zitsysteem** beschikt over een breed gamma aan ziteenheden die gebruikt kunnen worden voor een juiste positionering.
- Mogelijkheid om de rug- en zitbreedte te variëren met een ruimer gamma.
- Het **telescopisch zitframe** biedt een extreem lage zithoogte om beter onder tafel aan te schuiven.

### Gebruiksgemak

De *Storm<sup>4</sup>* is ontwikkeld met gebruiksgemak als uitgangspunt. De batterijen zijn **uiterst gemakkelijk te vervangen** en de elektronica is **eenvoudig toegankelijk** voor onderhoud.

### Stijlvol design

Het modern design van de *Storm<sup>4</sup>* accentueert de **robuuste constructie** en de **goede rijeigenschappen**.

De moderne LED-verlichting sluit fraai aan bij de belijning. Invacare kan verschillende kleurrijke sierstrips leveren om de rolstoel een eigen karakter te geven. Ook de behuizing is in verschillende kleuren leverbaar.

## LiNX Smart Technology: Redefining Mobility

*Invacare LiNX* is ons besturingssysteem dat beschikt over een **zelflerende functie** dankzij **geavanceerde technologie** en zorgt voor een revolutionaire rijervaring. Het biedt adviseurs de mogelijkheid om elektrische rolstoelen sneller en gemakkelijker te configureren en af te stemmen.

De **LiNX Smart Technologie** krijgt programmeer- en onderhoudupdates die **draadloos** en **real-time** kunnen worden uitgevoerd. Met **eenvoudige toegang** tot statistische en diagnostische informatie biedt **LiNX** volledig inzicht voor adviseurs.



### Touchscreen technologie

De REM400-bediening heeft een indrukwekkend 3,5" kleuren touchscreen waarbij **minimale kracht** vereist is voor de bediening. Nu de moderne technologie zijn weg heeft gevonden naar de markt van elektrische rolstoelen, kan deze innovatie en interactieve bediening worden geconfigureerd op basis van de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de gebruiker.



### Extra bedieningen

Voor degene die de standaard bediening niet kan gebruiken, biedt **LiNX** een selectie van andere bedieningen. Hierdoor wordt de **onafhankelijkheid** van de gebruiker vergroot. Dit omvat een compacte bediening, een compacte bediening met minimale werking, een kinbesturing en dubbele besturingsopties.

## Eigenschappen en opties

### USB-lader

2 x USB 2.0 ports leveren tot 1A per stuk om apparaten opgeladen te houden. Ophangstrip maakt eenvoudige bereikbaarheid mogelijk.



### Ingebouwde Bluetooth

De REM400-bediening geeft gebruikers de mogelijkheid om met 3 apparaten tegelijkertijd verbonden te zijn en kan gekoppeld worden aan een computermuis.

### LiNX G-Trac® technologie

Voor complexere besturingsbehoeften zorgt **LiNX** voor een verbeterde functionaliteit en besturing terwijl **G-Trac®** (optioneel) dit versterkt en ervoor zorgt dat de stoel de rijrichting aanhoudt zoals de besturing dat aangeeft.




### Lage zithoogte

Lage zithoogte van 400 mm (met zitlift): beter aanschuiven aan tafels en gemakkelijker toegang tot voertuigen.



### Zitkanteling

Mechanische of elektrische zitkanteling tot maximaal 25 graden voor een comfortabele en optimale zithouding.

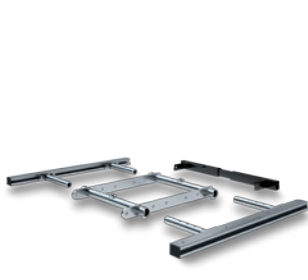

### Telescopisch instelbaar zitframe

Het nieuwe **Modulite** zitsysteem biedt een breed gamma aan positioneropties.



### Opklapbare armsteun

Het **Modulite** zitsysteem is beschikbaar met een multiverstelbare opklapbare armsteun voor meer comfort en maken transfers gemakkelijker.



### Elektrische rughoekverstelling

De elektrische rughoekverstelling heeft een virtueel draaipunt voor een natuurlijke beweging. Deze kan achteraf worden geplaatst.



### Aandrijving

Stijlvol en modern vormgegeven. Behuizing en voorwielophanging zijn in diverse kleuren leverbaar.



### Zijrails

De zijrails maakt het mogelijk traploos de zitdiepte in te stellen, armsteunen te monteren en het is eenvoudig accessoires te bevestigen.



### Toegankelijkheid

Alle elektronica, aansluitingen en bekabeling zijn gemakkelijk toegankelijk voor reparatie en onderhoud.



### LED-verlichting

Sterke en heldere verlichting voor- en achteraan voor een optimale veiligheid.



## Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze **Invacare-website**.

	Zitbreedte	Zitdiepte	Rughoogte	Totale hoogte	Rughelling	Hoogte armsteun	Totaalgewicht
<b>Modulite™</b>	380 - 530 mm	410 - 510 mm	480, 540, 560 mm <sup>1,10</sup>	1020 - 1190 mm	90 - 120°	275 - 340/ 325 - 390 mm <sup>11</sup> 245 - 310/ 295 - 360 mm <sup>12</sup>	174 kg <sup>3</sup>
<b>Recaro</b>	490 - 530 (360) mm	460 - 510 mm	770 - 830 mm <sup>1</sup>	1300 mm	90 - 135°	250 - 340 / 290 - 380 mm	174 kg <sup>3</sup>

	Zithoogte	Lengte OL	Zithelling	Totale breedte	Totale lengte incl. voetsteunen	Totale lengte zonder voetsteunen	Max. gebruikersgewicht
<b>Invacare Storm<sup>4</sup></b>	400 - 650 mm <sup>4</sup> 450 / 480 mm zonder lifter	290 - 460 mm <sup>5</sup>	0° - 25° <sup>9</sup>	630 mm (wielbasis)	1190 mm <sup>7</sup>	910 mm	150 kg

	Batterijcapaciteit	Draaicirkel	Max. beklimbare obstakelhoogte	Max. veiligheidshelling	Motorcapaciteit	Max. rijnsnelheid	Max. rijafstand
<b>Invacare Storm<sup>4</sup></b>	73.5 Ah	1770 mm	60 / 100 mm	20% (11.3°) 15% (8°) met lifter	340 W	6 / 10 km/u	tot 36 km <sup>8</sup>




1. Gemeten vanaf zittingplaat
2. Manueel instelbaar
3. Verschilt per configuratie
4. Grond tot zittingplaat, zonder zitkussen
5. Gemeten van voetplaat, tot zittingplaat
6. + 50 mm armsteun verstelling

7. Beensteun in de grootste hoek
8. Gemeten volgens ISO 7176-4 @ 6 km/u
9. Elektrisch; manueel instelbaar 0-9°
10. Afhankelijk van keuze rugondersteuning
11. Met eendelige zitplaat
12. Met telescopisch zitframe

13. **Invacare Modulite** zitcomponenten zijn kruislings aanpasbaar met alle elektrische rolstoelen van Invacare en gedeeltelijk met de stoellijn van Invacare Rea.

### Standaard framekleuren

Blue (RAL 5026)

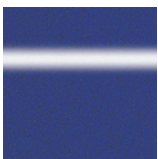

Black (RAL 9005)



Champagne (O314)



Transparent Red (O200)



White (RAL 9016)



Olive Green (RAL 6003)



Raadpleeg Invacare Unique om jouw **Storm<sup>4</sup>** te personaliseren.

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare N.V.  
Autobaan 22 - 8210 Loppem  
Belgium

Trusted Solutions,  
Passionate People

