

matrx[®]
SEATING SERIES

Elite E2 Rugsystemen



Invacare[®] **Matrx[®] Elite E2[™]**

INNOVATIE | COMFORT | VRIJHEID

INVACARE
Yes, you can.[®]

Ondersteuning aan de houding voor onafhankelijke mobiliteit

De nieuwe **Elite 2 rugsteun** is onze nieuwste innovatie op het gebied van positionering en biedt maximale houdingsondersteuning voor mensen met beperkte mobiliteit. Met een montagepin functie voor moeiteloze bevestiging, is de **E2 rugsteun** ook verkrijgbaar in een groot aantal verschillende breedtes en hoogtes om een maximale pasvorm te garanderen. De nieuwe Ripple Foam technologie biedt temperatuurregeling en verbeterde onderdamping voor de meest comfortabele ondersteuning ooit.

Ergonomisch Design

Het nieuw ergonomisch design verhoogt de ondersteuning en drukverdeling om een nauwkeurigere en comfortabelere pasvorm te garanderen. Het ontwerp is gevormd om het bekken te ondersteunen en ruimte te bieden aan de heupen om de stabiliteit en balans te vergroten.



Rugschaal

- ▶ Uitsparingen om lucht te laten circuleren
- ▶ Verticale sleuven voor het aanpassen van bindingen
- ▶ Uitsparing voor het staartbeen
- ▶ Voorgeboord voor mogelijke installatie van een PostureFlex buikband



Ripple Foam Technologie

Het geribbelde schuimoppervlak verhoogt de luchtcirculatie voor een beter ademend vermogen, betere temperatuurregeling en verminderde luchtvochtigheid. Het zeer veerkrachtig schuim biedt een ontlastingszone voor de wervelkolom, samen met een betere onderdompeling en verminderde schuifkracht.



Hoes

- ▶ Vochtbestendige en ademende Meshtex™ buitenhoes
- ▶ Schuim en bekleding overlappen de structuur van de rugleuning voor extra bescherming en comfort



Montagepin bevestiging

De rugleuningen zijn op de stoel gemonteerd en vastgezet met eenvoudig verstelbare montagepinnen. De flexibele bevestiging is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van een reeks lichaamsvormen en -maten, en kan zelfs worden aangepast wanneer de gebruiker zit. Het kan ook worden gepositioneerd om obstakels in het frame te vermijden.



Montagepinnen

- ▶ Hoogte en breedte verstelbaar
- ▶ Past op stoelen hetzelfde als model breedte of 2,5 cm breder / smaller
- ▶ De hoogte van de rugleuning kan worden aangepast, zelfs als de gebruiker in zijn stoel zit
- ▶ De bevestiging kan zo worden geplaatst dat obstakels in het frame zoals armsteunen en versterkingsbalken worden vermeden
- ▶ MiniSet interface standaard op rughoogtes tot 410 mm, EasySet interface standaard op 460/510 mm rughoogtes

De Matrix E2 rugsteun is verkrijgbaar in twee contourdieptes



▲ **E2 Rug**
Elite E2 - 80 mm Contour

▲ **E2 Deep Rug**
Elite E2 Deep - 150 mm Contour

Technische gegevens

- ▶ Breedte: 360, 380, 410, 430, 460, 480, 510 mm
- ▶ Hoogte: **NIEUW 160 en 210** mm/260, 310, 360, 410, 460, 510 mm
- ▶ Max gebruikersgewicht: 136kg.




Vaste rompsteunen

- ▶ Vaste zijpanelen kunnen binnen of buiten de rugleuning worden geïnstalleerd
- ▶ In hoogte verstelbaar dankzij de verticale uitsparing, kan excentrisch zijn
- ▶ Compatibel met standaard Elite E2 rugleuningen, vanaf hoogte 260 mm

Montage aan de
binnenkant

Montage aan de
buitenkant

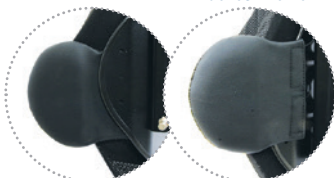

Wegzwenkbare rompsteunen

- ▶ Standaard compatibel met E2-ruggen 260 mm en hoger, gecompenseerd met ruggen van 310 mm en hoger
- ▶ Verkrijgbaar in 4 kussenmaten: XS / S / M / L

Een volledig accessoires assortiment ▼



▲ Ruggengraat

Richt zich op het bekken om een rechtopstaande houding te bevorderen.

- Anatomische posturale wig, ideaal voor de lumbale regio en de postero-superieure illiacale stekels.
- Kan op de gewenste maat worden bijgesneden.
- Gemakkelijk te plaatsen in de rugschaal.



▲ Matrx beschermhoes

Ter bescherming van de rugleuning. Kan worden gewassen en gedesinfecteerd voor een betere hygiëne. Gemakkelijk aan en af te nemen om te reinigen.



▲ PostureFlex buikband

Ontworpen om de intra-abdominale druk te verhogen voor verbeterde stem- en ademhalingscontrole. Biedt comfortabele, rechtopstaande houdingsondersteuning en blijft toch flexibel voor functionele activiteiten.

Eenvoudig te bevestigen

- 3 montagehoogtes beschikbaar in voorgeboorde gaten op de rugleuning.
- Verkrijgbaar in 2 maten: M / L
- Optioneel viervoudig ontgrendellipje voor eenvoudig onafhankelijk aanbrengen en verwijderen van PostureFlex



▲ Hoofdsteun interfaceplaat

Deze lichtgewicht en discrete interface voor het bevestigen van de hoofdsteun kan worden geïnstalleerd zonder de bekleding van de rugleuning af te nemen. Inbegrepen bij alle ruggen van 360 mm en hoger. Optionele extra sterke stalen hoofdsteunbevestiging voor toepassingen in extreme toon of zwaar gebruik.



▲ Harnas interfaceplaat

Interfaceplaat voor nauwkeurige plaatsing van een harnas.



▲ Matrx Privacy flap

Kan aan een Matrx rugleuning worden bevestigd met behulp van de klittenband aan de onderkant van de rugleuningbekleding. Verkrijgbaar in vier maten: XS / S / M / L

Een volledig assortiment bevestigingsmiddelen ▾

voor verschillende toepassingen en grotere compatibiliteit met ons rolstoelassortiment

Standaard bevestigingen



MiniSet:

- ▶ Standaard op alle Elite 2 / Elite 2 Deep ruggen tot 410 mm hoog



EasySet:

- ▶ Standaard op alle Elite 2 / Elite 2 Deep ruggen 460 mm & 510 mm

Optionele bevestigingen



Vaste MiniSet:

- ▶ Permanente montage waarvoor gereedschap nodig is om bevestigingen en rugleuning te verwijderen. Aanbevolen voor stoel- en rugleuning
- ▶ Optioneel voor Elite E2 en Elite E2 Deep ruggen tot 410 mm hoog



Vaste EasySet:

- ▶ Permanente montage waarvoor gereedschap nodig is om bevestigingen en rugleuning te verwijderen. Aanbevolen voor stoel- en rugleuning
- ▶ Optioneel voor de Elite E2 en Elite E2 Deep ruggen van 460 en 510 mm hoog



Split bevestigingen:

- ▶ Maakt de montage van een Matrix rugleuning mogelijk ondanks een structureel obstakel (verstevigingsbalk)
- ▶ Optioneel voor Elite E2 en Elite E2 Deep ruggen compatibel met standaard bevestigingen. Niet compatibel met MiniSet bevestigingen.



Heavy-Duty MiniSet:

- ▶ Aanbevolen voor hypotone gebruikers of voor intensief gebruik
- ▶ Quick release



Heavy-Duty EasySet:

- ▶ Aanbevolen voor gebruikers met hoge tonen of intensief gebruik

Aanpassingen: in hoek (40 °), in diepte (5 cm voor of achter de rugstokken), kan worden verschoven om de rotatie mogelijk te maken.

Compatibiliteit: rugstokken van 25 mm, standaard meegeleverd voor rugstokken van 19 en 22 mm.

Bouw een volledig assortiment positionering

Invacare biedt ook een compleet assortiment positioneringsproducten als aanvulling op uw Matrix Elite E2-rugleuning.



Bodypoint riem



Invacare Matrix® Libra kussen



Invacare Matrix® Elan hoofdsteun



Tel.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®

© 2020 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging. Matrix E2 Rugleuning - BE - 10/2020

