

Move Up



**De zetel die comfort
en mobiliteit combineert**

Modern design | 4 wielen | Comfort



Yes, you can.

De Move Up verrijkt het assortiment Invacare sta-op stoelen dankzij zijn nieuwste functionaliteiten - een garantie voor comfort, mobiliteit en esthetiek.

4 wielen voor meer comfort

De Move Up is verkrijgbaar in een elektrische versie met 1 motor. Zijn warme en uitnodigende stijl kenmerkt een zachte en gewatteerde rugleuning. Voor optimaal comfort zijn zijdelingse hoofdsteunen in de rugleuning geïntegreerd. De vorm van de arMLEUNINGEN met afgeronde hoeken bevordert het comfort in de bovenste ledematen en zorgt voor een goede bloedcirculatie.

De Move Up onderscheidt zich door het innovatief mechanisme voor het activeren van de 4 wielen, waarmee de stoel door het huis kan worden verplaatst. Zijn subtiele en elegante look past in elke omgeving.



Uniek activeringssysteem met 4 wielen

Om de zetel van de ene naar de andere kamer te verplaatsen, is de Move Up uitgerust met 4 intrekbare wieltjes. Activering gaat moeiteloos via een voetpedaal aan de achterkant van de uitklapbare zetel. De gebruiker kan tijdens de overgang comfortabel in de stoel blijven zitten. Om de oorspronkelijke stabiliteit terug te krijgen, kan dezelfde pedaal worden gebruikt om de wielen in te trekken en de veiligheid tijdens het gebruik te garanderen.

Activering



Intrekking



Een modern en elegant design

Ontdek onze nieuwe Heritage-coating, ontworpen met duurzame en resistente materialen. De waterdichte en waterafstotende eigenschappen bevorderen de duurzaamheid van de stof. Onderhoudsvriendelijk, vlekken kunnen eenvoudig worden verwijderd met een vochtige doek. Dit model is verkrijgbaar in twee kleuren:

- ▶ Heritage Camel voor een gezellige en verfijnde look.
- ▶ Grijs Polyester voor een elegante en trendy look.



5

UNIEKE KENMERKEN

1

Rugleuning met geïntegreerde zijhoofdsteunen

- ▶ Ontlast de nekwerfels.
- ▶ Ontworpen om optimale comfort en ondersteuning te bieden.

2

Nieuwe kussens

- ▶ Strak design met een sterk gewatteerde rugleuning.
- ▶ Afneembare achterhoes voor machinewas.

Innovatief mechanisme voor het activeren van de wielen

3

- ▶ Toegankelijk en gemakkelijk te bedienen pedaal.
- ▶ De patiënt kan tijdens de verplaatsing in zijn stoel blijven zitten.

4

Zijdelings opbergvak

- ▶ Eenvoudig toegankelijk, ideaal om de afstandsbediening in op te bergen.

5

















Gemotoriseerde kanteling

- ▶ Gelijktijdig verstellen van de rugleuning en de voetsteun.
- ▶ Continuïteit tussen de zitting en de voetsteun.




Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

					
Relax Positie ▼	Gelifte Positie ▼	Continuïteit tussen de zitting en voetsteun ▼	Zitdiepte ▼	Zithoogte ▼	Zitbreedte ▼
<i>Move Up</i>	◆	◆	◆	480 mm	500 mm
					
Max. hellingshoek van de rug ▼	Totale hoogte ▼	Totale breedte ▼	Totale diepte (gesloten) ▼	Totale diepte (open) ▼	Noodzakelijke afstand voor max. hellingshoek ▼
<i>Move Up</i>	120°	1110 mm	770 mm	970 mm	1580 mm
					
Hoogte vloer/armsteunen ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	Gewicht product ▼	Dichtheid v/h schuim ▼		
<i>Move Up</i>	640 mm	120 kg	65 kg	Rug 28kg/m ³ Armsteunen 23kg/m ³	

Kleuren bekleding ▼

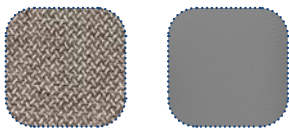

Heritage Camel



Grijs PVC/
Polyester

Onderhoud Heritage Camel bekleding ▼



Reinings-temperatuur



Niet bleken



Drogen



Strijken



Stomen

Tel.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.

© 2022 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voor aankondiging. Move Up - BE-NL - 04/2023

