



matrx[®]MAC



MULTI-VERSTELBARE CONTOUR RUG

Moeiteloos aanpassen





matrx[®] MAC

Klinisch ontwerp

Matrx[®] MAC introduceert onze nieuwe aanpak voor op maat gemaakte rugondersteuning. Het is onze nieuwe multi-verstelbare contourrug, verkrijgbaar met een optioneel HUG kussen.

GEPERSONALISEERDE AANPASSINGEN

Volledig configureerbaar voor een grote variëteit aan lichaamsvormen en condities. Deze rug is aanpasbaar als de gebruikersbehoeften veranderen. De Matrx MAC is onze nieuwe manier om pasvorm, positionering en comfort op maat te bieden.



PRECISIE

Elke specificatie, ontwikkeld door ons team van medici, is gericht op efficiëntie, kwaliteit en een nauwkeurige pasvorm. Mix & Match ons assortiment zijsteunen voor een pasvorm op maat.



COMFORT

Het voorgevormd design en het optioneel HUG kussen geven extra onderdempeling en omhulling terwijl het gebruikerscomfort wordt verbeterd.



STEUN

Gebaseerd op de anatomisch gevormde Matrx E2 rug, bevordert de Matrx MAC een optimale houding en versterking van de natuurlijke uitlijning.

m Modulair om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen

De Matrx® MAC is een modulaire oplossing die het meest geschikt is voor zit- en rugkantelingen. Met verwisselbare en tweehandige zijsteunen die kunnen worden gecombineerd en op elkaar afgestemd om op maat gemaakte rompondersteuning te bieden aan mensen met complexere positioneringsbehoeften.

OP MAAT

3 contourdieptes en asymmetrische contour



ASYMMETRISCH



23cm Contour



15cm Contour



9cm Contour

m Helpt milde scoliose te corrigeren


Posturale instorting kan de orgaanfunctie beïnvloeden. De Matrx MAC zorgt voor een natuurlijke uitlijning van de wervelkolom en de houding.



VERSTELBARE BREEDE EN HOOGTE



Geschikt voor stoelen die tot 5 cm breder dan de rugleuning

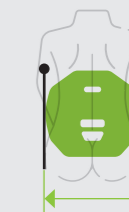

Past op stoelen met dezelfde breedte als de rugleuning



Geschikt voor stoelen die tot 2,5 cm smaller dan de rugleuning




Kies Matrix HUG voor geavanceerd comfort

De optionele HUG-kussenvulling is gemaakt van zachte Stamina® vezels voor maximale onderdompeling en omhulling.

- Microklimaatbeheersing
- Hypoallergeen
- Machinewasbaar en droogvriendelijk
- Behoudt zijn vorm

Aanbevolen bij milde posturale asymmetrieën.

matrix[®]HUG

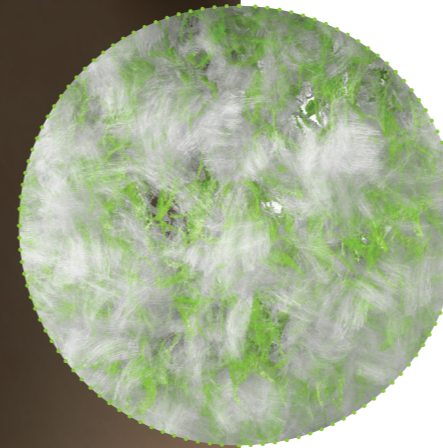

Stamina®
vezels

RUG INZETSTUKOPTIES



STANDAARD

Dubbellaags schuim
Superzachte/stevige HR-schuimlagen voor comfort en ondersteuning



OPTIONEEL

HUG
Zachte Stamina® vezels voor maximaal comfort en omhulling



Mounting & Hardware Options



EASYSSET

Standard on all 46-56cm high back supports. Quick release for easy removal of backrest.



HEAVY-DUTY EASY SET

Recommended for high tone or heavy intended use.



SPLIT

Allows clearance of frame obstacles, quick release 46-56cm high back supports. Quick release for easy removal of backrest.



FIXED

Permanent mount requires tools for removal. Recommended for tilt / recline applications. Suitable for 46-56cm high back supports.


Back Sizes

		WIDTH				
		41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
	Fits W/C	39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
HEIGHT	41cm	●	●	●	●	●
	46cm	●	●	●	●	●
	51cm	●	●	●	●	●
	56cm	●	●	●	●	●

Tech Data

-  Angle adjustment40°
-  Depth adjustment10cm
-  Lateral contour9, 15, 23cm
-  Lateral width adjustment2.6cm
-  Lateral height adjustment20cm
-  Cover cleaning60°C
-  Max. User weight136kg
-  Limited warranty2 years

● Matrix MAC featured with Matrix Loxx headrest on Invacare Rea Azalea wheelchair

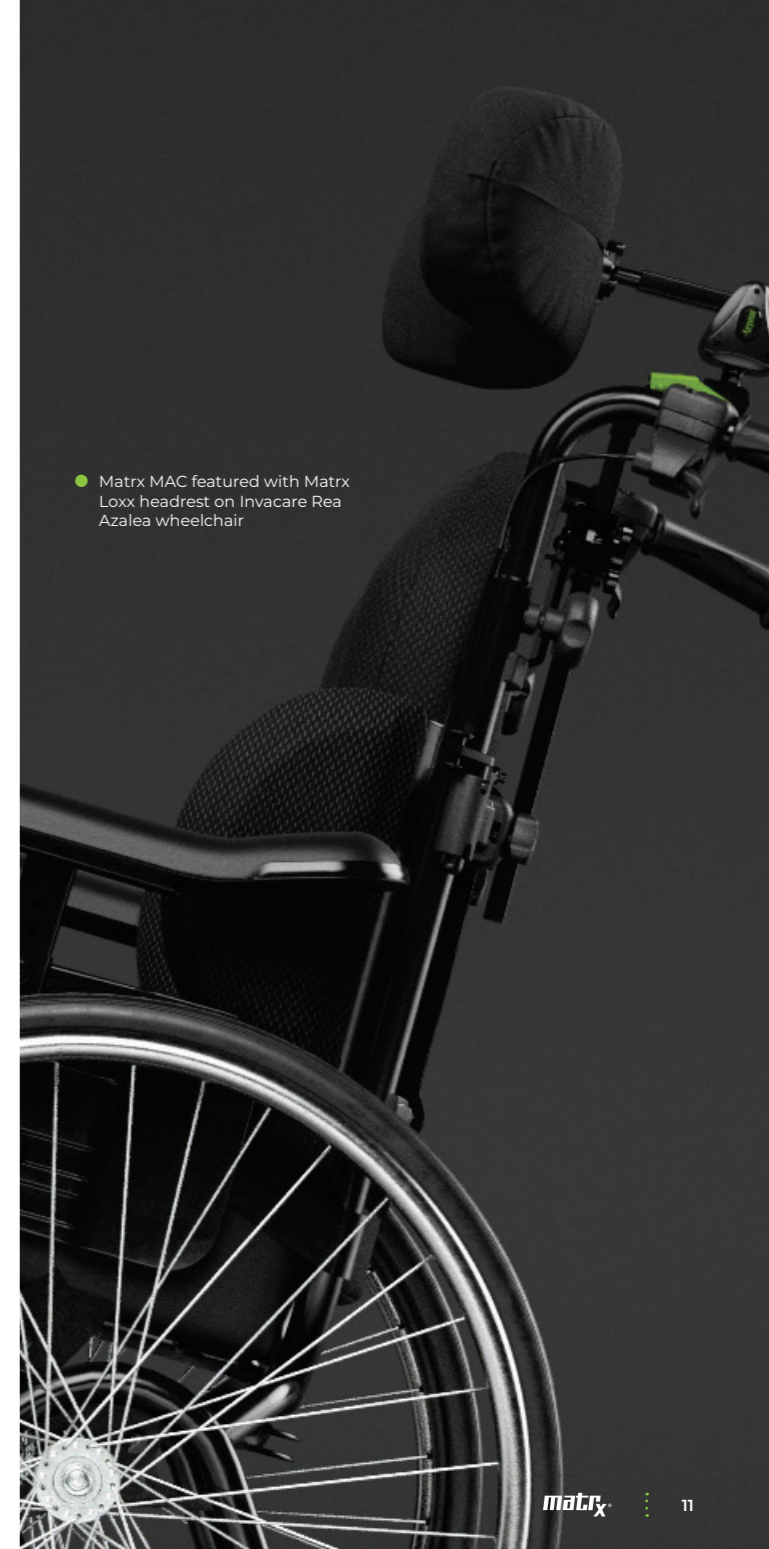



Matrix® MAC Backs used to transport a client should be equipped with a Headrest Support and may only be used in conjunction with wheelchairs that comply with the performance requirements of RESNA WCI9 or ISO 7176- 19.



[invacare.eu.com](https://www.invacare.eu.com)

© 2024 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. EU – 06/24