



VOUWBARE ELEKTRISCHE ROLSTOEL

Esprit Action

Elektrische rolstoel voor binnen/opvouwbaar
Matige tot hoge klinische behoefte



Belangrijkste kenmerken

- Gebaseerd op de bekende Invacare Action manuele rolstoel, biedt de Esprit Action een veelvoud aan verstel- en personalisatiemogelijkheden om aan al uw behoeften te voldoen.
- Compact en wendbaar frame gecombineerd met 14" Alber gemotoriseerde wielen voor een soepele en comfortabele rit.
- Opvouwbaar kruisframe, zoals een manuele rolstoel en demontabel voor eenvoudig transport. Gewicht van het zwaarste onderdeel: 15 kg.

Framekleuren



OPTIES

	TDX SP2 & NB Ultra Low Maxx	Storm 4 (X-Plore) Modulite	TDX SP2 & NB Modulite	AVIVA RX40 Modulite	Esprit Action
Armsteunen					
Afneembaar	-	◆	◆	◆	◆
Opklapbaar	-	○	○	◆	-
Opklapbaar en parallel	◆	○	○	○	-
Rugleuning					
Neerklapbaar	-	◆	◆	◆	-
90° tot 120° manueel	-	◆	◆	◆	○
90° tot 120° elektrisch	-	○	○	◆	-
90° tot 170° elektrisch met schuifcompensatie	○	-	-	-	-
Zitkanteling					
20°	-	-	○	-	-
30°	-	○	○	◆	-
45/50°	◆	-	○	◆	-
Elektrische zitlift	○	○	○	○	-
Beensteunen					
Hangers	◆	◆	◆	◆	◆
Centrale hangers	-	-	-	-	-
Manuele beensteunen	-	○	○	○	○
Manuele centrale beensteunen	-	○	○	○	-
Elektrische beensteunen	○	○	○	○	-
Elektrische centrale beensteunen	○	○	○	○	-
Batterijen					
7,5 Ah	-	-	-	-	◆
11Ah	-	-	-	-	-
30Ah	-	-	-	-	-
50 Ah	-	-	◆	-	-
60 Ah	-	-	-	◆	-
73 Ah	◆	◆	◆	◆	-
Bediening					
REM21I/216	◆	◆	◆	◆	-
REM400 touchscreen + Bluetooth	○	○	○	○	-
Alber	-	-	-	-	◆
Houder voor bediening					
Opklapbaar	-	◆	◆	◆	◆
Opklapbaar binnen/buiten	◆	◆	◆	◆	-

- ◆ Standaardoptie
- Betaalde optie

ONZE SERVICE

Uw expert voor elektronische rolstoelen

Onze expert, Jordy, helpt u graag met uw demoproducten, reparaties en programmering.

Demos:

- Configuratie op maat van uw demostoel*.
- Tijdens uw demo is er hulp op locatie mogelijk om de stoel aan te passen en te programmeren.

Programmering:

- Hulp bij het aanpassen aan de behoeften van de gebruiker.

Reparaties:

- Reparaties kunnen op locatie of in uw atelier worden uitgevoerd.

Mak vandaag nog een afspraak met Jordy!
Contacteer hem via telefoon +32 (0)476 24 77 68 of per mail via jlaureyn@invacare.com

**Alleen beschikbaar met Aviva RX/TDX SP2/Storm4.*



Gerecycled papier

Tel. : +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België

© 2025 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elektrische rolstoelen - BE - 12/25



POWER SERIES

Elektrische Rolstoelen



TYPE AANDRIJVING

TDX® SP2 & TDX® SP2 NB

Midwielaandrijving
Binnen/Buiten + NB voornamelijk Binnen



Belangrijkste kenmerken

- Gepatenteerd **SureStep®** veringssysteem voor een soepele en comfortabele rit, zelfs op moeilijk terrein.
- De **Stability Lock** functie zorgt ervoor dat alle zes wielen in contact blijven met de grond voor stabiliteit en veiligheid.
- Centrale aandrijfwielen maken snelle bochten mogelijk en vergemakkelijken de controle over de stoel. Ideaal voor gebruik met speciale bedieningselementen.

Beschikbare ziteenheden

- Modulite, Ultra Low Maxx

Framekleuren



AVIVA RX

Achterwielaandrijving
Binnen/Buiten



Belangrijkste kenmerken

- Gepatenteerd CTC veringssysteem absorbeert trillingen en garandeert hoge stabiliteit, omdat alle vier wielen in contact blijven met de grond.
- Compact frame voor een betere wendbaarheid in elke omgeving.
- Strakke lijnen, discrete hoeken en een hoogwaardige afwerking voor een moderne look.

Beschikbare ziteenheden

- Modulite

Framekleuren



Storm 4 & Storm 4 X-Plore

Achterwielaandrijving
Binnen/Buiten




Belangrijkste kenmerken

- Robuust frame, wielophanging op de aandrijfwielen, stijve voorvorken, 10" stuurwielen voor optimale grip en stabiel rijden in de buitenomgeving.
- De elektrische hoogteverstelling van de stuurkolom zorgt voor uitstekende stabiliteit en maakt een zithoogte vanaf 400 mm mogelijk.
- De **X-Plore** versie voegt twee extra veringen toe aan de voorste draagarmen, die naar behoefte van de gebruiker kunnen worden ingesteld. Ideaal voor gebruik op moeilijk terrein.

Beschikbare ziteenheden

- Modulite

Framekleuren

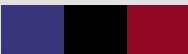

TYPE ZITEENHEID

Ultra Low Maxx

Multi-positie ziteenheid
Hoge tot complexe klinische behoeften



Belangrijkste kenmerken

- Alle elektrische functies met standaard compensatie voor optimaal comfort, een hoog preventieniveau en een goede houding.
- De **LNX** elektrische centrale beensteun, gecombineerd met de biomechanische elektrische rugleuning met hoge compensatie (ESR), zorgt voor een gemakkelijke overgang van zitten naar liggen met behoud van de juiste houding.
- Een breed assortiment aan **Matrix®** en **BodyPoint®** positioneringsaccessoires voor een hoog preventieniveau en maximale ondersteuning.

Beschikbare onderstellen

- TDX SP2 & NB

Modulite

Modulaire ziteenheid
Matige tot hoge klinische behoeften



Belangrijkste kenmerken

- De Modulite ziteenheid biedt oneindig veel eenvoudige en intuïtieve verstelmogelijkheden voor een houding op maat.
- De rugleuning klapt neer op de zitting door simpelweg de pompe van de rugleuning te ontgrendelen. Dit verlaagt de totale hoogte van de stoel en vergemakkelijkt het opbergen.

Beschikbare onderstellen

- AVIVA RX, TDX SP2 & NB, Storm 4

ELEKTRONICA

LiNX & Mo-Vis

Speciale bedieningen en programmering
Matige tot complexe klinische behoeften



Belangrijkste kenmerken

- Breed assortiment joysticks, van basic tot geavanceerd, zoals de **REM400** met 3,5" touchscreen en Bluetooth.
- Maxx Resolve** joystickhouders en BodyPoint joystickknoppen.
- Breed assortiment speciale **Mo-Vis** bedieningselementen (versterkte joystick, compacte joystick, microjoystick, occipitale joystick, kinjoystick, enz.).
- Intuïtieve programmering, in realtime en draadloos.
- LiNX** elektronica optimaliseert de rijprestaties in realtime.
- LiNX G-trac** technologie detecteert en corrigeert zelfs de kleinste afwijkingen in het traject voor efficiënter rijden.